



Einfach gute Schwingungen



Sortiment und Preise für Privatanwender

**Magnetfeldtherapie
Bioresonanz
Wasseraufbereitung**

02/2026

Herzlich Willkommen bei uns!

Liebe Interessentin,
lieber Interessent,

wir freuen uns, dass Sie zu uns gefunden haben, weil Sie sich für die Anwendung der Magnetfeldtherapie und Bioresonanz interessieren.

Mit diesem Katalog stellen wir Ihnen unsere Produktpalette für den Privatgebrauch vor und geben Ihnen einen Einblick, wie Sie die unterschiedlichen Geräte nutzen können.

Unsere Geräte sind entwickelt von Dr. rer. nat. W. Ludwig®, Institut für Bioinformative Medizin, Weikersheim.



Dr. rer. nat. Wolfgang
Ludwig (1927-2004)

Wir führen das Lebenswerk von Dr. rer. nat. W. Ludwig weiter: Die AMS GmbH hat im Jahr 1998 das gesamte technische Know-how, alle Schutz- und Vertriebsrechte von ihm erworben.

„Wolfgang Ludwig gehört (...) zu den Physikern, die die Bioinformativen Verfahren in Deutschland wesentlich mitgeprägt haben. Er trägt dazu bei, dass die deutsche Naturheilkunde ihre immer noch führende Rolle in der Welt behaupten kann.“

Prof. Dr. F.-A. Popp in: Informative Medizin. S. 3, Essen 1999



Dr. rer. nat. Frank Beck
Geschäftsführender Gesellschafter
der AMS GmbH

„Als ich Dr. Ludwig vor nunmehr über 25 Jahren das erste Mal traf, konnte ich als promovierter Naturwissenschaftler seinen Ausführungen zwar weitgehend folgen aber - wie man so schön sagt - allein mir fehlte der Glaube. Je mehr ich mich jedoch mit seinen Forschungsarbeiten beschäftigte, desto schneller brachen große Teile meines damaligen Weltbildes zusammen.“

Dr. Ludwig wird häufig auch als „Vater der Magnetfeldtherapie“ bezeichnet und prägte zu seinen Lebzeiten den Begriff „Bioinformative Informationsübertragung“ – eine Formulierung, die den biophysikalischen Sachverhalt in einem umfassenden Sinne trifft.

Heute bin ich nicht nur stolz darauf, sein Lebenswerk fortzuführen, sondern es erfüllt mich immer noch mit besonderer Freude, wenn ich höre, wie hilfreich die Bioinformative Medizin sein kann.“

AMS GmbH

Hauptstraße 26

97990 Weikersheim

Tel.: 0 79 34 / 99 34 89 0

E-Mail: info@ams-ag.de

Web: www.ams-ag.de

Inhalt



Magnetfeldtherapie - Bioresonanz - Bioinformative Verfahren	4	Wasseraufbereitung	21
Kurze Einführung in unsere Produktvielfalt	6	Glucosamine Gold Gel / ESM 2	22
Unsere Klein- und Handgeräte	8	Tensoren und Zubehör	23
MEDISEND®	9	Haben Sie ein Haustier?	24
MEDISEND®protect	10	Gerätezubehör	25
MEDICUR®pro	11	Literatur	26
METRONOM solar	12	Zahlungsbedingungen, AGB	27
METRONOM C	13	Kontakt	28
MEDICUR®color	14		
Das Team	15		
Unser Großgerät für den Privatbedarf	16		
MEDISEND®super			
Unser Leasingangebot	20		

Hinweis:

In diesem Katalog sind die Verkaufspreise grundsätzlich mit 19% bzw. 7 % Mehrwertsteuer ausgewiesen. Selbstverständlich werden die zum Zeitpunkt des Erwerbs gültigen Mehrwertsteuersätze berücksichtigt und die Preise entsprechend angepasst.

Der Kosmos, alle lebenden Organismen, Menschen, Tiere und Pflanzen bestehen nur aus einem milliardsten Teil fester Materie, den Atomkernen und den sie umgebenden Elektronen. Dazwischen befindet sich ein großer, „leer“ erscheinender Raum, der jedoch gefüllt ist mit elektromagnetischen Wellen.

Diese elektromagnetischen Felder stehen untereinander und mit der Außenwelt kommunizierend in Kontakt.

Der Physiker Dr. W. Ludwig (1927–2004) strebte danach, mit einem Gerät elektromagnetische Wellen zu erzeugen, die vom Körper verstanden werden. Sie sollten **der ungestörten Natur nachempfunden** sein. Nur so können sie eine Reaktion des Körpers hervorrufen. Deshalb untersuchte er die uns umgebenden physiologischen Umweltsignale. Für seine Doktorarbeit beschäftigte er sich mit dem Einfluss elektromagnetischer Felder auf das Nervensystem.



Was versteht man darunter und was ist das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig®?

Lesen Sie nachfolgend über die Eigenschaften von pulsierenden Magnetfeldern und wie sie genutzt werden können:

- Kleiner Ausflug in die **Physik**
- Physiologische **Umweltsignale**: Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen – Signale, die uns naturgemäß aktuell umgeben
- **Qualitätsmerkmale** physiologisch wirksamer Magnetfeldgeräte
- **Anwendungsmöglichkeiten** der Magnetfeldtherapie

Einfach gute Schwingungen

Umweltsignale

1

Bei intakter Umwelt sind wir verschiedenen Frequenzen und Frequenzspektren ausgesetzt, an die unser Organismus gewöhnt ist:

Schumannfrequenzen

1952 entdeckt von dem Physiker Winfried Otto Schumann.

Eine Frequenz, die permanent zwischen Erdoberfläche und Ionosphäre durch Entladungen der Atmosphäre (Gewitter) aufrecht erhalten wird. Dadurch entsteht eine sogenannte transversal magnetische Welle mit einer Grundfrequenz von **7,8 Hz** – die **Schumannfrequenz**. Ihre Oberwellen reichen bis in den Megahertzbereich.

Ein Teil des Gehirns aller Säugetiere, der Hippocampus, schwingt ebenfalls mit 7,8 Hz. Der Hippocampus ist u.a. wichtig für Aufmerksamkeit und Konzentrationsfähigkeit.

2

Geomagnetfrequenzen

Hierbei handelt es sich um die Schwingungen von **64 Spurenelementen** wie Eisen, Natrium, Calcium usw., die in unserer Erdkruste enthalten sind. Jedes dieser Spurenelemente hat ein charakteristisches Schwingungsmuster. Das natürliche Erdmagnetfeld nimmt diese Schwingungsmuster auf – dies wird als „Modulation“ bezeichnet. Somit sind wir in natürlicher Umgebung ständig mit den Informationen der Spurenelemente in Berührung.

Laut Messungen von Geologen und Medizinerinnen sind in der Erdkruste die gleichen Spurenelemente enthalten wie in den Erythrozyten, den roten Blutkörperchen – und zwar nahezu im gleichen Verhältnis untereinander.

3

Solarfrequenzen

Die Sonne ist eine weitere natürliche Quelle wichtiger Signale für uns. Sie sendet verschiedenste Frequenzspektren, von denen die meisten nicht bis zur Erdoberfläche gelangen.

Es gibt in der Atmosphäre jedoch zwei „Fenster“, durch die bestimmte Frequenzen der Sonne zu uns dringen: **Licht im sichtbaren Bereich**
Frequenzen im UKW-Bereich

Dabei lässt sich feststellen, dass es für jede sichtbare Frequenz eine **korrespondierende Frequenz im UKW-Bereich** gibt. Dies sind die Solarfrequenzen.

• Bioinformative Verfahren

Auf eine wissenschaftlich eingehende Betrachtung der Wirkungsweise von Magnetfeldern wird in diesem Rahmen bewusst verzichtet – gerne können Sie uns kontaktieren, um sich eingehender zu informieren.



Die Jahrtausende alte klassische chinesische Medizin wusste bereits: Der Mensch braucht mindestens zwei Umweltsignale, **ein Yang-Signal von oben (Schumann- und Solarfrequenzen)** und **ein Yin-Signal von unten (Geomagnetfrequenzen)**.

Um diesen **Yin-Yang-Ausgleich** herzustellen, generiert jedes der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte sowohl die Schumannfrequenzen als auch die Geomagnetfrequenzen. Zusätzlich erzeugen alle Großgeräte sowie die Kleingeräte **MEDICUR®pro**, **MEDICUR®color**, **METRONOM solar** und **METRONOM C** auch die Solarfrequenzen.

noch ein bisschen weiter lesen ☺

Umweltsignale

Qualitätsmerkmale

Um eine physiologische Wirksamkeit der erzeugten Wellen zu erreichen, müssen diese bestimmte Eigenschaften aufweisen. Dabei sind **Magnetfeldstärke und Impulsform** des Signals von besonderer Wichtigkeit.

Der amerikanische Physiker R. Adey stellte fest, dass eine positive physiologische Wirkung von Magnetfeldern auch schon bei schwacher Feldstärke nachweisbar ist. Es muss lediglich die physiologische Ansprechschwelle erreicht werden – eine größere Intensität kann unter Umständen sogar kontraproduktiv wirken. Deshalb liegt die **Magnetfeldstärke** der von Dr. Ludwig® entwickelten Geräte bei geringen 0,2 – 20 µTesla.

Um eine **Impulsform** zu nutzen, die dem Körper bekannt ist, orientierte sich Dr. Ludwig® bei der Entwicklung seiner Geräte an der Weiterleitungsform der Nervenimpulse. Diese ist gekennzeichnet durch einen schnellen Anstieg und ein darauf folgendes langsames Abklingen des Impulses.

nur noch ein Kasten

Anwendungsmöglichkeiten

Bereits im Altertum wurden Krankheiten mit sogenanntem „Magnetit“ (natürliches Magnetgestein) erfolgreich behandelt. Das Prinzip ist einfach: Magnetfelder können die **Regulationsfähigkeit** verbessern und so zur Aktivierung der **Selbstheilungskräfte** beitragen.

Eine der wichtigsten Frequenzen – wenn nicht gar die wichtigste von allen – ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen von 7,8 Hz. Sie ist neutral, ausgleichend und unterstützt die Konzentration. Wir nennen sie die „Wohlfühlfrequenz“. Eine randomisierte placebokontrollierte Doppelblindstudie wurde mit dem von uns vertriebenen Gerät MEDICUR® durchgeführt. Dabei wurde die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Bei Interesse können Sie die Studie bei uns anfordern.

Generell kann jede Frequenz für eine Anwendung geeignet sein. Einige Frequenzen haben sich für bestimmte Situationen bewährt. So gibt es beispielsweise einerseits anregende, tonisierende Frequenzen und andererseits solche, die eher zur Entspannung eingesetzt werden.

Die **Kleingeräte** von Dr. Ludwig® haben unterschiedliche **voreingestellte Programme/Frequenzen**, aus denen Sie wählen können. Mit den **Großgeräten** (**MEDISEND®super** / **MEDISEND®super C** / **MEDISEND®super III**) können Sie jede Frequenz zwischen **0,1 bis 1000 Hz** einstellen. Spezifische Information hierzu erhalten Sie in den jeweiligen Produktprospekten.

Eine Eigenschaft elektromagnetischer Wellen ist ihre Fähigkeit, Informationen aufnehmen und transportieren zu können. So kann die elektromagnetische Welle unserer Geräte als reines **Anwendungssignal** mit entsprechender Frequenz und zusätzlich auch als **Trägerwelle** genutzt werden. Sie kann sowohl exogene als auch endogene Informationen transportieren.

Die Kleingeräte verfügen zu diesem Zweck über einen **Ampullenhalter**. Großgeräte bieten die Möglichkeit, einen Becher (**MEDICUP**) für die Informationsübertragung/Substrateinschwingung anzuschließen.

geschafft!

Magnetfeldtherapie – eine kurze Einführung in unsere Produktvielfalt

Magnetfeldtherapie – wofür?

Was versteht man unter der Magnetfeldtherapie/ Bioinformativer Medizin

Die **Magnetfeldtherapie** eignet sich, dem Körper zur **Regulation** zu verhelfen. Es geht nicht darum, eine bestimmte Krankheit zu heilen, - das wollen und dürfen wir auch gar nicht behaupten - sondern unsere Geräte erzeugen bioenergetische Schwingungen, die **Prozesse der Selbstregulation** anregen. Hierfür generieren die Geräte ein **elektromagnetisches Feld**, welches auf den Körper übertragen wird.

Die **Anwendung** ist sehr einfach: Je nach Gerät wird entweder der angeschlossene Applikator oder das Gerät selbst **auf oder neben den Körper** gelegt. Das elektromagnetische Feld durchdringt die Kleidung und **durchflutet jede Zelle**.

Es können **unterschiedliche Frequenzen** genutzt werden. Beispielsweise kann eine Anwendung **anregend oder beruhigend** sein oder hilfreich bei **Elektrosmogsensibilität**. Neben diesen Beispielen gibt es noch viele weitere Anwendungsmöglichkeiten.

Unsere **Kleingeräte** verfügen über **voreingestellte Frequenzen**, die je nach Situation wählbar sind. Das **Großgerät MEDISEND®super** hat keine Programmvorwahl. Stattdessen bietet es eine **Bandbreite an Frequenzen** (0,1 - 1000 Hz), die individuell eingestellt werden können.

Elektromagnetische Wechselfelder Kommunikation durch Biophotonen

Die Kommunikation in unserem Körper findet mit Hilfe **elektromagnetischer Wellen** statt. Die Biophysik nennt sie **Biophotonen**. Sie haben die Funktion eines drahtlosen Informationsnetzes, das die gesamten Zellaktivitäten steuert. Biophotonen bilden die Grundlage für die **bioenergetische Selbstregulation**.

Die von **Dr. Ludwig** entwickelten Magnetfeldgeräte generieren **elektromagnetische Wellen**, die **Regulationsprozesse** anregen und die **Selbstheilungskräfte** aktivieren können. Die Geräte arbeiten auf der Basis von **schwachen, schnell veränderlichen elektromagnetischen Feldern im Nieder- und Hochfrequenzbereich** (in Oberwellen bis 10 MHz).

Informationsübertragung Übertragung von Substratinformation

Eine der Eigenschaften von elektromagnetischen Wellen ist, dass sie dazu fähig sind, **Informationen aufnehmen und transportieren** zu können.

Es ist das gleiche Prinzip wie bei Funk und Fernsehen: Eine Trägerwelle wird moduliert, wodurch Bilder und Töne bzw. Informationen übertragen werden.

Somit können Sie das pulsierende elektromagnetische Feld der Geräte auf **zwei Arten** nutzen:

Zum einen als **reines Anwendungssignal** mit der entsprechenden gewählten Frequenz und zum anderen zusätzlich - im Sinne der **Bioresonanz** - als **Trägerwelle** zur Übertragung von Informationen.

Dabei können Sie sowohl **endogene** (körpereigene) als auch **exogene** (z.B. Homöopathika) **Informationen** übertragen. Je nach Gerät kommen hierfür entweder der **MEDICUP** (Becher für das **MEDISEND®super**) oder ein **Ampullenhalter** (für Kleingeräte) zum Einsatz.

Warum ein Gerät von Dr. Ludwig?

Das Besondere an den AMS-Geräten von Dr. Ludwig

Dr. Ludwig war es wichtig, Geräte zu entwickeln, welche ein künstliches pulsierendes elektromagnetisches Feld erzeugen, das dem **natürlichen Feld der Umwelt so ähnlich wie möglich** ist. Damit wollte er sicherstellen, dass der Körper es leicht hat, diese Signale zu **verstehen**.

Deshalb hat er unsere Umwelt mit ihren uns umgebenden natürlichen Feldern gründlich untersucht und seine Magnetfeldgeräte so konstruiert, dass diese **natürlichen Frequenzen** so genau wie möglich nachgebildet werden.

Auf der **vorhergehenden Doppelseite** erfahren Sie mehr über unsere **Umweltsignale (Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen)** und die **Qualitätsmerkmale** der Geräte von Dr. Ludwig.

Noch heute werden alle unsere Geräte nach den **Vorgaben von Dr. Ludwig** hergestellt und erzeugen somit elektromagnetische Felder in unterschiedlichen Frequenzen, die vom Körper leicht verstanden werden.

Das Pfeilsymbol



Alle Geräte bauen auf den biophysikalischen Erkenntnissen von **Dr. rer. nat. W. Ludwig, Institut für Bioinformative Medizin, Weikersheim** auf. Die von Dr. Ludwig entwickelten Geräte mit den entsprechenden Qualitätsmerkmalen erkennen Sie am **Pfeilsymbol**.

Unsere Produktpalette

Für die Nutzung zu Hause haben wir eine breite Palette von unterschiedlichen **Kleingeräten**. Auch Anwendungen mit einem unserer **Großgeräte** (dem **MEDISEND®super**) können ganz einfach zu Hause durchgeführt werden. Gerne helfen wir Ihnen, sich in unseren Produkten zurechtzufinden. Zur besseren Übersicht haben wir sie in folgende Themengebiete unterteilt:

• Klein- und Handgeräte:

MEDISEND®, MEDISEND®protect, MEDICUR®pro, METRONOM solar, METRONOM C und **MEDICUR®color** sind klein und handlich und werden sowohl zu Hause als auch in der Praxis eingesetzt (S. 8-14)

• Großgerät:

Informieren Sie sich über unser **MEDISEND®super** zur Magnetfeld-Anwendung zu Hause (S. 16-19)

• Wasseraufbereitung:

Für unsere Gesundheit gibt es nichts Wichtigeres als reines Wasser. Mit dem **spring-time®premium pro** holen Sie sich Ihre eigene Quelle klaren, energetisierten Wassers nach Hause (siehe Wasserkatalog)

• Zubehör, Tensoren, Literatur

Es gibt noch viel mehr zu entdecken (ab S. 22)

Unsere Webseite

Wenn Sie Zugang zum **Internet** haben, besuchen Sie uns auch gern auf unserer **Webseite www.ams-ag.de**.

In unserer Rubrik „**Gut zu Hause**“ finden Sie weitere ausführliche Informationen über alle Geräte. Die entsprechenden Informationsbroschüren können Sie entweder als PDF direkt von der Webseite herunterladen oder in gedruckter Form bei uns anfordern. In unseren allgemeinen Rubriken erfahren Sie mehr über die Anwendung und den Nutzen von Magnetfeldern. Außerdem lesen Sie, auf welchen Veranstaltungen Sie uns treffen können.

Veranstaltungskalender

Wir sind regelmäßig auf **Messen vertreten und führen Online-Seminare durch**, wo Sie uns persönlich kennenlernen können. Oder besuchen Sie uns (nach Anmeldung) einfach in Weikersheim.

Finanzierung

Größere Anschaffungen sind oftmals nicht ganz einfach zu bewerkstelligen. Wir bieten Ihnen deshalb unterschiedliche **Finanzierungsmöglichkeiten** wie z.B. Miete auf Zeit, Leasing oder Ratenzahlung. Lesen Sie Genaueres über unser Leasingangebot auf S. 20.

Falls Sie anstelle von Lesen lieber mit uns sprechen und Ihre Fragen stellen wollen - wir sind auch gern telefonisch für Sie da: **0 79 34 / 99 34 89 0**

Montags bis Donnerstags: 8:00 bis 17:00 Uhr
Freitags: 8:00 bis 14:30 Uhr

Wir freuen uns auf Sie!

Unsere Klein- und Handgeräte

Alle unsere Klein- und Handgeräte sind hervorragend für die **Nutzung zu Hause** geeignet.

Sie verfügen über **voreingestellte Programme**. Dies sind beispielsweise **anregende, beruhigende oder ausgleichende Frequenzen** oder solche, die sich für **elektrosensible** Menschen bewährt haben.

Zur **Anwendung** nutzen Sie einfach eine der **zur Auswahl stehenden Frequenzen**, legen sich das eingeschaltete Gerät auf oder neben sich oder stecken es in die Tasche.

Um auch mit den Kleingeräten die Fähigkeit zur **Informationsübertragung** des pulsierenden elektromagnetischen Feldes zu nutzen, können Sie an alle Geräte* den **mitgelieferten Ampullenhalter** anschrauben.

In diesen Halter können Sie eine **Glasampulle mit endo- oder exogenen Informationen** geben, die Sie bei der Anwendung **übertragen** möchten.

Das können homöopathische Mittel sein, Bachblüten, Eigenosoden oder jegliche andere Substrate.

Die in der Ampulle enthaltene Information wird mit **jeder gewählten Frequenz** übertragen - die Übertragung ist **unabhängig** davon, welches voreingestellte Programm des Gerätes Sie nutzen.

Die Kleingeräte* verfügen über eine **automatische Abschaltung**, die, außer beim **MEDICUR®pro**, von ihnen auch **deaktiviert** werden kann. Nach der automatischen Abschaltung können Sie das Gerät bei Bedarf sofort wieder erneut einschalten - eine **Überdosierung der Anwendung ist nicht möglich**.

Die **physiologische Reichweite** unserer Kleingeräte beträgt je nach Modell ca. **30-40 cm** (im Durchmesser **60-80 cm**).

Mit Ausnahme des **MEDISEND®protects*** werden die Kleingeräte mit **handelsüblichen Batterien** betrieben. Im Lieferumfang sind sogenannte **Starterbatterien** enthalten. Die **Lebensdauer üblicher Batterien** beträgt je nach Typ zwischen 3 Monaten und einem Jahr, auch bei täglicher Anwendung.

Unsere Klein- und Handgeräte sind robust, verschleiß- und **wartungsfrei**, handlich und einfach zu bedienen. Sie werden selbstverständlich mit einer ausführlichen Gebrauchsanweisung geliefert.

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie ausführlichere Beschreibungen für jedes unserer „Kleinen“.

90 Tage Rückgaberecht



Nach dem Kauf unserer Klein- und Handgeräte (Bestellnummer 100 - 107) haben Sie ein **90tägiges Rückgaberecht mit einer Geld-zurück-Garantie**. Dies ist auf der Rechnung vermerkt. Senden Sie uns das Gerät innerhalb dieser Frist in **einwandfreiem Zustand** zurück, erstatten wir Ihnen den **vollen Kaufpreis** (abzüglich der Versandkosten).

Pfeilsymbol



Die Geräte mit der Technologie von **Dr. Ludwig®** erkennen Sie an dem **Pfeilsymbol**. Dieses Symbol steht für die Erzeugung eines elektromagnetischen Biofelds, das der **ungestörten Natur** nachempfunden ist. **Dr. Ludwig** entwickelte ein Verfahren, mit dem es gelingt, das **Frequenzspektrum von 64 Spurenelementen** auf Eisenkerne zu modulieren. Die auf diese Art strukturmodifizierten Eisenkerne werden in allen unseren Geräten verbaut, so dass die Information der spezifischen Schwingungsmuster der Spurenelemente (die **Geomagnetfrequenzen**) automatisch mit dem vom Gerät generierten pulsierenden Magnetfeld auf den Körper übertragen wird.

Lesen Sie mehr zu den **Umweltsignalen** und den **Qualitätsmerkmalen** der Geräte von Dr. Ludwig auf Seite 4/5.

* gilt für alle Kleingeräte außer dem **MEDISEND®protect**: Das **MEDISEND®protect** verfügt **nicht** über einen Ampullenhalter, hat **keine** automatische Abschaltung und wird **nicht** mit Batterien betrieben.

Nr. Frequenz Anwendungsbeispiele

1	3 Hz	Nacht <ul style="list-style-type: none"> • begünstigt Entspannung und Schlaf • unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen
2	4 Hz	
3	1,2 Hz	Elektrosensibilität <ul style="list-style-type: none"> • unterstützt bei Sensibilität auf Elektromog • fördert Entspannung und Abwehrkräfte
4	7,8 Hz	Konzentration / Energetisierung <ul style="list-style-type: none"> • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • 7,8 Hz ist der Hauptwert der Schumannfrequenzen und unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • mit der Einstellung Nr. 4 (7,8 Hz) lassen sich wasserhaltige Lebensmittel energetisieren, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
5	8,2 Hz	
6	10 Hz	Tag <ul style="list-style-type: none"> • fördert das allgemeine Wohlbefinden • unterstützt bei Wetterfühligkeit, Reise- und Seekrankheit, Hörschwindel, Jetlag u.a.
7	12 Hz	
8	20 Hz	Fitness <ul style="list-style-type: none"> • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel u.a.
9	33 Hz	

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	1,2 / 3,0 / 4,0 / 7,8 / 8,2 / 10 / 12 / 20 / 33 Hz
Batterien:	zwei Batterien 1,5 V Typ AAA
Gewicht:	52 g
Größe:	5 x 6,6 x 1,5 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterien, zweite Rückwand mit integriertem Ampullenhalter, drei Glasampullen, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	276,47 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	329,- €	
Versandkosten:	7,- €	

Bestell-Nr. 102



MEDISEND®

Der kleine Ludwig



Unser kleinstes tragbares Magnetfeldgerät

Das beliebte **MEDISEND®** bietet Ihnen **unterschiedliche Programme** zur Anwendung bei Konzentrationsmangel, Abgeschlagenheit, Wetterfühligkeit, Schlafproblemen, Elektrosensibilität und mehr.

Viele unserer Kunden nennen unser **MEDISEND®** liebevoll „Der kleine Ludwig“ und möchten dieses kleine Gerät nicht mehr missen. Es ist ein alltäglicher Begleiter und wird in Jacken- und Hosentaschen überall hin mitgenommen. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 60 cm.

Das **MEDISEND®** ist das erste von **Dr. Ludwig** entwickelte Gerät mit pulsierendem Magnetfeld und schon seit **über 50 Jahren** auf dem Markt.

MEDISEND® fördert und stabilisiert die Regulationsfähigkeit

Das MEDISEND®...

→ ... **bietet neun unterschiedliche Frequenzen**, die Sie je nach Situation wählen können (s. Tabelle links). Für die Einstellungen Nacht / Konzentration / Tag / Fitness gibt es jeweils zwei Auswahlmöglichkeiten. Probieren Sie aus, welche für Sie am angenehmsten ist.

→ ... **ermöglicht Ihnen über einen Ampullenhalter** (wahlweise nutzbar durch mitgelieferte zweite Rückwand, siehe Bild oben) das Einschwingen von Substraten.

MEDISEND®protect

sorgenfrei am computer



Funktion - Anwendung

Für alle Lebewesen haben elektromagnetische Wellen eine fundamentale Funktion: Sie steuern und regeln die körpereigenen „Bioströme“. Wird diesen von außen durch Elektromog dauerhaft „dazwischengefunkt“, können biologisch sensible Regelkreise aus dem Takt geraten.

Moderne Arbeitsplätze stecken voller Elektromog-Quellen. Wir sitzen zwischen Computer, Laptop, Fax, Telefon, Kopiergerät und Drucker, müssen ständig erreichbar sein. Wir tragen Headset, Handy und Piepser, arbeiten unter Neon-Licht, verwenden Sparlampen und in der Nähe befindet sich ein Handymast. UMTS, WLAN, Bluetooth sorgen für eine schnelle Datenübertragung - per Flatrate sind wir immer online.

Kinder und Jugendliche sitzen oft stundenlang vor dem Computer, telefonieren mit dem Handy oder einem schnurlosen Telefon und haben gleichzeitig Musik im Ohr.

Auf Dauer reagieren zunehmend mehr Menschen sensibel auf Elektromog. Umgangssprachlich wird von „Elektromog-Sensibilität“ gesprochen. Eine dauerhafte Elektromogstrahlung kann individuell unterschiedliche Befindlichkeitsstörungen auslösen.

Das **MEDISEND®protect** wird einfach in einen USB-Port Ihres Computers/Laptops gesteckt und erzeugt dort ein elektromagnetisches Biofeld, das der **ungestörten Natur** nachempfunden ist. An diesem stärkenden Feld orientiert sich der Organismus und wird auf diese Weise im Idealfall überhaupt nicht mehr von den Störwellen des Computers und anderer Geräte irritiert.

Im Durchmesser hat das **MEDISEND®protect** eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Das **MEDISEND®protect** wird über einen beliebigen USB-Anschluss in Ihrem PC/Laptop betrieben.

Es erzeugt ein natürliches und komplexes elektromagnetisches Feld mit 7,8 Hz (Hauptwert des Schumannfrequenz-Spektrums). Selbstverständlich wird im **MEDISEND®protect** auch das Geomagnet-Frequenzspektrum erzeugt.

Die Schumannfrequenz von 7,8 Hz wird zusätzlich mit der Frequenz von 1,2 Hz moduliert. Diese Frequenz hat sich als sehr wirksam gegenüber Elektromog (insbesondere Handy-Strahlung) erwiesen.

Es bezieht über den USB-Anschluss lediglich den Strom. Es erfolgt kein Datenaustausch.

Es kann an **jeder USB-Schnittstelle** angeschlossen werden - somit können Sie es z.B. auch **im Auto** nutzen

Mit einem entsprechenden Adapter kann das **MEDISEND®protect** mit vielen Smartphones betrieben werden.

Technische Daten:



Magnetfeld-frequenz:	7,8 Hz - moduliert mit 1,2 Hz
Batterien:	die Stromversorgung erfolgt durch den USB-Anschluss am Computer
Gewicht:	15 g
Größe:	7 x 2 x 1,2 cm
Lieferumfang:	Gerät in Metallbox, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	100,-- €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	119,- €	
Versandkosten:	7,- €	



119,-

Bestell-Nr. 100



Hersteller:
Snowden Healthcare,
Ruddington Lane,
Nottingham, NG11 7EP,
UK

MEDICUR[®] pro

mobiler Schmerztherapeut

Das MEDICUR[®] pro ...

- ➔ ... ist ein einfach zu bedienendes Magnetfeldtherapiegerät mit drei Programmen. Es wird seit vielen Jahren sehr erfolgreich zur Linderung von **Schmerzen** eingesetzt und ist als **Medizinprodukt** zugelassen.
- ➔ ... aktiviert Ihre **Selbstheilungskräfte** auf natürliche Weise und unterstützt die **Selbstregulation**. In der Folge werden oft weniger Medikamente mit ihren entsprechenden Nebenwirkungen benötigt.
- ➔ ... ist **handlich** - kaum größer als eine Packung Papiertaschentücher.
- ➔ ... wird zur **Anwendung** einfach auf oder neben den Körper, auf den Solarplexus oder direkt auf den Beschwerdeherd gelegt. Es schaltet sich nach 10 Minuten automatisch ab. Bei Bedarf kann es wiederholt angewendet werden – eine Überdosierung ist nicht möglich. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Generell sorgt **jedes** der einstellbaren Programme für eine mögliche **Schmerzlinderung**.

Darüber hinaus haben sich die unterschiedlichen Frequenzen erfahrungsgemäß für folgende in der Tabelle genannten Anwendungen bewährt:

Frequenz

Anwendungsbeispiele

3,0 Hz

beruhigend

- begünstigt Entspannung und Schlaf
- unterstützt bei Nervosität und Schlafstörungen

7,8 Hz

ausgleichend/stabilisierend

- schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration
- unterstützt bei Wetterfühligkeit
- die Schumannfrequenz von 7,8 Hz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“
- Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät eine Minute daneben legen

20 Hz

anregend

- setzt Energie frei
- nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	3,0 / 7,8 / 20 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	110 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie und einer Ersatzbatterie, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	10 Jahre



Preis:

Preis netto:	368,91 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	439,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

439,- €






Bestell-Nr. 104

Eine randomisierte, placebokontrollierte Doppelblindstudie, die mit dem MEDICUR[®] pro w am King's College Hospital in London durchgeführt wurde, hat die Wirksamkeit von 7,8 Hz bei Kniearthrose nach schulmedizinischen Kriterien belegt. Die biometrische Auswertung bewies eine hochsignifikante Wirkung bei den teilnehmenden Patienten. Bei Interesse können Sie sich die (englischsprachige) Studie auf unserer Webseite herunterladen:

www.ams-ag.de ➔ Informationen ➔ Downloads ➔ sämtliche Downloads



METRONOM solar mit Frequenzdurchlauf für Zapperfunktion

Symbol und chin. Element	Frequenz	Anwendungsbeispiele
 Erde	Frequenz- durchlauf 1000 - 1 Hz	Basisprogramm <ul style="list-style-type: none"> • Stabilisierung des Organismus • Harmonisierung des vegetativen Nervensystems • Zapperfunktion durch die Oberwellen bis in den MHz-Bereich
 Feuer	33 Hz	anregend <ul style="list-style-type: none"> • setzt Energie frei • nützlich bei Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Erschöpfung, Energiemangel
 Holz	7,8 Hz Hauptwert Schumann- frequenz	ausgleichend / stabilisierend <ul style="list-style-type: none"> • schenkt Kraft, fördert Ruhe, Ausgleich und Konzentration • die Schumannfrequenz von 7,8 Hz ist unsere wichtigste „Wohlfühlfrequenz“ • Energetisierung von wasserhaltigen Lebensmitteln, indem Sie das Gerät etwa eine Minute lang daneben legen
 Metall	3,0 Hz	beruhigend / entspannend <ul style="list-style-type: none"> • begünstigt Entspannung und Schlaf, unterstützt bei innerer Unruhe und Schlafstörungen
 Wasser	1,2 Hz	Elektrosensibilität <ul style="list-style-type: none"> • unterstützt bei Sensibilität auf Elektromog • die Nogier-Frequenz von 1,2 Hz fördert Entspannung und Regulation

Das **METRONOM solar** eignet sich mit seinem **Frequenzdurchlauf** zur Kräftigung des Organismus. Mit dem sich wiederholenden Durchlauf von 1000 bis 1 Hz wird dem Körper eine große Bandbreite an Frequenzen angeboten, **um die Regulation anzuregen**. Der Frequenzdurchlauf wird häufig zur **Unterstützung von ausleitenden Verfahren** gewählt.

Im Frequenzdurchlauf erreicht das **METRONOM solar** in seinen Oberwellen sogar den **Megahertzbereich**. Hierdurch werden auch Frequenzen von Hulda Clark und Royal Rife durchlaufen und das **METRONOM solar** kann als **alternatives Zapper-Gerät** genutzt werden. Anders als der Reizstrom üblicher Zapper, erreicht ein elektromagnetisches Feld sogar den **intrazellulären Raum**.

Zusätzlich **überträgt** es mit Hilfe des mitgelieferten Ampullenhalters **Informationen sämtlicher Substrate** wie z.B. Homöopathika, Bachblüten u.a. Das Magnetfeld wird hierbei als **Transport-schiene** genutzt.

Das **METRONOM solar** hat fünf unterschiedliche Programme zur Auswahl (s. Tabelle). Zur Nutzung legen Sie das eingeschaltete Gerät einfach **neben oder auf sich** (z.B. auf den Solar Plexus) oder stecken es in die Tasche. Im Durchmesser hat es eine **physiologische Reichweite** von ca. 80 cm.

Das **METRONOM solar** vereint die wichtigsten Funktionen unserer Kleingeräte **MEDISEND®** und **MEDICUR®pro**. Darüber hinaus sind die **METRONOM**-Geräte die einzigen Magnetfeld-Kleingeräte nach Dr. Ludwig®, die neben Festfrequenzen auch über einen **Frequenzdurchlauf** verfügen.

Neben den unterschiedlichen einstellbaren Programmen generiert das **METRONOM solar** immer auch die **Geomagnetfrequenzen**. Zusätzlich werden auch die **Solarfrequenzen** abgegeben.



Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf von 1000 - 1 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	121 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	460,50 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	548,- €	
Versandkosten:	7,- €	

Bestell-Nr. 103



METRONOM C

mit Speicherplatz für
Bioinformationen

Das **METRONOM C** gehört zur sogenannten **C-Generation** der AMS Magnetfeldgeräte und unterscheidet sich vom **METRONOM solar** dadurch, dass es über einen Speicherplatz verfügt, auf dem digitale Bioinformationen (**BIOWAVES**) abgelegt werden können.

Um den Speicherplatz des **METRONOM C** nutzen zu können, ist der Anschluss an ein Großgerät der C-Generation (**MEDISEND®super III** / **MEDISEND®super C** oder **WAVE TRANSFER C**) im Zusammenhang mit der **AMScomsystem** Software notwendig. Diese Großgeräte werden von Therapeuten genutzt.

Somit ist es möglich, digitalisierte Spektren als Einzel- oder Komplexmittel auf dem **METRONOM C** zu speichern. Diese gespeicherte Information kann mittels Knopfdruck wahlweise mit jedem der fünf Programme dazugeschaltet werden.

Wenn Sie jemanden kennen, der eines dieser **Großgeräte** mit dem **AMScomsystem** zur Verfügung hat, ist es nicht notwendig, selbst ein Großgerät zu besitzen. Manche unserer Kunden haben einen Heilpraktiker, naturheilkundlichen Arzt, Physiotherapeuten oder anderen Therapeuten, der eines unserer Großgeräte mit dem **AMScomsystem** nutzt. Somit kann die individuelle Information auch durch diesen Therapeuten auf das eigene **METRONOM C** übertragen und dort gespeichert werden.*

Natürlich ist es auch wie beim **METRONOM solar** möglich, mit Hilfe des **mitgelieferten Ampullenhalters** analoge Informationen zu übertragen. Das Magnetfeld wird auch hier als Transportschiene genutzt.

Das **METRONOM C** ist eine Art Zwillingbruder unseres **METRONOM solar**-Gerätes.

Es hat mit seinen fünf Programmen



Frequenzdurchlauf mit Zapperfunktion

33 Hz, anregend

7,8 Hz, ausgleichend

3,0 Hz, beruhigend

1,2 Hz für Elektrosensibilität

exakt die gleichen Anwendungsmöglichkeiten wie das **METRONOM solar**. Lesen Sie hierzu die Produktbeschreibung auf der vorhergehenden Seite.



Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	1,2 / 3,0 / 7,8 / 33 Hz sowie Frequenzdurchlauf 1000 - 1 Hz
Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	127 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	545,38 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	649,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

649,- €

Bestell-Nr. 107

* Wenn Sie auf der Suche nach einem Therapeuten in der Nähe sind, der mit unseren Geräten arbeitet, schauen Sie doch auf unserer Webseite in die Therapeutenliste. Vielleicht ist eine Praxis ganz in Ihrer Nähe: www.ams-ag.de → Informationen → Therapeuten finden



MEDICUR® color

Farben und Magnetfeld

Das MEDICUR® color...

- ➔ ... kombiniert **sieben Farben** in Form von Solarfrequenzspektren mit **pulsierendem Magnetfeld**. Jede Farbwahl generiert eine andere Frequenz. Die sieben Farben lassen sich **einzel**n oder **in Kombination** einsetzen (120 mögliche Kombinationen).
- ➔ ... kann mit seiner positiven Wirkung auf die physische und psychische **Regulationsfähigkeit** bei psychosomatischen, neurovegetativen Befindlichkeiten eingesetzt werden.
- ➔ ... **optimiert** bewährte energetische Behandlungsverfahren wie Chakren-Behandlung und Akupunktur.
- ➔ ... kann durch den mitgelieferten Ampullenhalter zur **Substrat-übertragung** von z.B. Homöopathika, Bachblüten usw. eingesetzt werden. Seine **physiologische Reichweite** beträgt im Durchmesser 80 cm.

Nr.	Farbe	Frequenz	Anwendungsbeispiele
1	Braun	33 Hz	sorgt für Vitalität und Lebenskraft
2	Rot	19 Hz	anregend, energetisierend
3	Orange	17 Hz	Wärme spendend, ausgleichend
4	Gelb	12,5 Hz	Sonnenlicht, unterstützt Ausleitung
5	Grün	9,5 Hz	Regenerationsunterstützung
6	Blau	7,8 Hz	Hauptwert Schumannfrequenz, konzentrationsfördernd, ausgleichend, Energetisierung von Wasser
7	Violett	3,3 Hz	beruhigend, Geborgenheit, Lösen emotionaler Blockaden
4 + 7	Gelb + Violett	1,2 Hz	Nogier-Frequenz, entspannend, hilfreich bei Elektrosensibilität
1 - 6	Weiß	129 Hz	Unterstützung des gesamten Stoffwechsels

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenz:	120 Kombinationen verschiedener Frequenzen
Batterien:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	120 g
Größe:	2,5 x 7,6 x 11 cm (ohne Ampullenhalter)
Lieferumfang:	Gerät mit Batterie, Ampullenhalter, drei Glasampullen, Klettbandage, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre



Preis:

Preis netto:	553,78 €
Preis inkl. 19% MwSt.:	659,- €
Versandkosten:	7,- €

inkl. 19% MwSt.

659,- €

Bestell-Nr. 106



Das Team

Dr. rer. nat. Frank Beck

Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter der AMS GmbH sowie Leiter des „Instituts für Biophysik Dr. Ludwig“

Ihn fasziniert die Kombination von wissenschaftlichen Fakten mit naturheilkundlichen Vorgehensweisen. Der ehemalige Leistungssportler und Träger des Silbernen Lorbeerblatts, (höchste verliehene sportliche Auszeichnung in Deutschland), ist ein weltweit gefragter und geschätzter Experte und hat bereits auf über 100 Kongressen referiert. Seine hohe Expertise liegt auf den Gebieten der Magnetfeld- und Bioresonanztherapie, Wasser als Energie- Informationsträger und der Elektrosensibilität. Wenn Sie ihn einmal sehen und hören wollen, dann gehen Sie auf unserer Webseite. Unter dem Menüpunkt „Medienbeiträge von Dr. Frank Beck“ finden Sie sehr interessante Webinare.

Eva Niesel

Geschäftsführerin, Marketing, Leitung Export, examinierte Gesundheitsschwester

Lebensfroh und präsent engagiert Sie sich für die Magnetfeldtherapie nach Dr. Ludwig. Beim Vertiefen in die MFT entdeckte Sie, dass die Wissenschaft auf das Unerklärliche gestoßen war und dass die Möglichkeiten unserer Vorstellungskraft real und grenzenlos sind. An vier Tagen die Woche ist Sie meist die Stimme an unserem Telefon und offen für all Ihre Fragen und Wünsche, betreut unseren Stand auf Messen und ist bei unseren Seminaren Ihre direkte Ansprechpartnerin vor Ort.

Anne Keßler

Leitung Sekretariat und Buchhaltung

Sie ist unsere gute Seele, die alle alten und neuen Geräte genau kennt. wSie ist zuständig für den Zahlungsverkehr sowie die Vorbereitung der Buchhaltung. Außerdem arbeitet Sie im Versand, kümmert sich um die Reparaturzugänge und hilft bei der Seminarvorbereitung. Es ist durchaus möglich, dass Sie bei Anruf unsere Frau Keßler am Telefon haben, die Sie gerne berät und Ihnen immer freundlich weiterhilft.

Angelika Beck

Auftragsbearbeitung und Kundendatenbank

Frau Beck erleichtert uns sehr den Arbeitsalltag. Sie kümmert sich um die Bestellungen und sorgt für die Rechnungsstellung. Außerdem ist Sie für die Pflege unserer Kundendatenbank verantwortlich, die mittlerweile aus über 23.000 Adressen besteht. Und vor allem ist Sie unser Sprachtalent und betreut u.a. unsere spanisch, französisch und portugiesisch sprechenden Kunden.

Sarah Bremer

Managerin AMS-Webseite

Ihr technischer Support, strukturiertes Arbeiten und großer Wissensschatz über Webseiten zeichnet Sie im besonderen Maße aus. Sie sorgt für die einwandfreie Funktionalität unseres Onlineshops und entwickelt unseren Webauftritt beständig weiter.

Verena Henn

unsere Perle

Sie sorgt für Ordnung und Sauberkeit, führt die Endkontrolle unserer Kleingeräte durch und verpackt sie.

Unser Großgerät für
den Privatbedarf

MEDISEND®super

Pulsierendes Magnetfeld und Bioresonanz



Für Sie und die ganze Familie

Um gesund zu sein und gesund zu bleiben, spielen **Eigenverantwortung und Eigeninitiative** eine wachsende Rolle. Prophylaxe, Regeneration und die tägliche Vorsorge haben eine hohe Priorität

Ganz gleich wie sich das Gesundheitssystem entwickeln wird - **Gesunderhaltung und Gesundung** sind jetzt und in Zukunft von besonderer Wichtigkeit. Natur- und Erfahrungsheilkunde können Sie bei Ihren Vorsorgemaßnahmen wirkungsvoll unterstützen.

Das **MEDISEND®super** hilft Ihnen dabei. Es vereint bewährte Methoden der Erfahrungsheilkunde:

- Pulsierendes Magnetfeld
- Bioresonanzverfahren

MEDISEND®super...

... nutzt das **pulsierende Magnetfeld** als **Anwendungssignal** und zusätzlich als **Trägersignal für exogene und endogene Bioinformationen/Substrate**. Dr. Ludwig fand zusammen mit zahlreichen Anwendern spezifische Frequenzprogramme für eine breite Auswahl von Anwendungen, um gezielt die Selbstheilungskräfte des Organismus anzuregen.

... verfügt über **einen Frequenzgenerator** mit dem Sie eine Frequenzbandbreite von 0,1 - 1000 Hz einstellen können. Die eingestellte Frequenz lässt sich bei Bedarf zusätzlich modulieren.

... nutzt die **MAGNETO-Schleife** als Applikator und überträgt hiermit das Magnetfeld zur Anwendung. Die Schleife ist unkompliziert in der Handhabung und handlicher als z.B. eine große Matte.

... verhindert durch den **eingebauten Hochleistungsakku** Elektrosmog und dessen Übertragung. Dies ist entscheidend für das **störungsfreie Einschwingen** von exogenen und endogenen Bioinformationen und von großer Wichtigkeit insbesondere für elektrosensible Personen.

... gibt die Möglichkeit, einen **MEDICUP** und **Handelektroden** anzuschließen. Hiermit können Sie auf **analogem Wege** sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) Informationen **auf das Magnetfeld übertragen** und zur Anwendung nutzen.

pulsierendes Magnetfeld
für Anwendung und
Informationsübertragung →

Frequenzspektrum
0,1 - 1000 Hz →

handlicher Applikator →

eingebauter Akku →

Substratübertragung →

Förderung der Regulationsfähigkeit

Die Handhabung des **MEDISEND®super**-Gerätes ist sehr einfach: Sie stellen mittels des Drehknopfes die **gewünschte Frequenz** ein, die Sie entweder mit einem **geeigneten Testverfahren** austesten oder aus der mitgelieferten **Liste der Erfahrungswerte** entnehmen. Dann starten Sie das Gerät. Die angeschlossene **MAGNETO-Schleife** gibt das pulsierende Magnetfeld in der gewählten Frequenz ab. Legen Sie die Schleife auf oder neben den Körper, um ihn in den **Wirkungskreis** des Magnetfeldes zu bringen (ca. **2 m** im Durchmesser).

← Anwendung

Die Geräte sind bestens geeignet, um sowohl **exogene** (z.B. Homöopathika) als auch **endogene** (körpereigene) **Bioinformationen** mit auf das pulsierende Magnetfeld zu übertragen und somit in die Anwendung einzubringen.

← Bioresonanz

Die Stromversorgung wird durch einen **wiederaufladbaren Akku** gewährleistet. Ein Schalter zur Trennung vom Stromnetz sorgt dafür, dass während der Anwendung **kein zusätzlicher Elektromog** erzeugt und übertragen wird.

Eine Anwendung dauert in der Regel **15 Minuten** - es sind jedoch auch längere oder kürzere Einheiten möglich.

Vor und nach der Anwendung sollte möglichst viel mineralarmes Wasser getrunken werden, um den Körper in seiner **Regulationsfindung und Ausleitung** zu unterstützen.

Das **MEDISEND®super** hat einen **Frequenzgenerator**, mit dem sich die Frequenzen zwischen 0,1 und 1000 Hz einstellen lassen. Die abgegebenen **Oberwellen reichen bis in den MHz-Bereich** hinein. Somit generiert es sämtliche **RIFE- und CLARK-Frequenzen** bis 10 MHz.

← Frequenzen

Weiterhin haben Sie die Wahl zwischen **zwei Frequenzdurchläufen**: 1000 bis 1 Hz und 100 bis 1 Hz. Hierbei durchläuft das Gerät innerhalb von ca. acht Sekunden alle Frequenzen in dem gewählten Intervall. Ist der Frequenz-Zyklus durchlaufen, beginnt er wieder von vorn. Dem Körper wird hiermit eine große Bandbreite an Frequenzen angeboten, **um die Regulation anzuregen**. Die Frequenzdurchläufe werden häufig zur **Unterstützung von ausleitenden Verfahren** gewählt oder als **Einstieg in einen Anwendungszyklus**.

Zur Auswahl der Frequenzen können Sie die mitgelieferte **Liste mit Erfahrungswerten** nutzen. Bei komplexen Fragestellungen ist es sinnvoll, wenn Sie die Wahl der Frequenzen durch ein **Testverfahren** unterstützen, wie z.B. Tensortestung, Kinesiologie, EAV oder RAC.

← Auswahl der Frequenzen

Die AMS bietet regelmäßig ein bis zwei Mal im Jahr einen **Tensorkurs** zum Erlernen dieser Testmethode an. Termine und mehr Information finden Sie auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Seminare**.

Neben den unterschiedlichen einstellbaren Frequenzen (u.a. die Einstellung auf **7,8 Hz, den Hauptwert des Schumannfrequenzspektrums**) werden vom **MEDISEND®super** immer zusätzlich auch die **Geomagnetfrequenzen** und die **Solarfrequenzen** abgegeben - **unabhängig davon**, welche spezifische Frequenz Sie zur Anwendung wählen.

Schumann-, Geomagnet- und Solarfrequenzen sind unsere **Umweltsignale**. Wir nennen sie die „Biologischen Normale“. Die genaue Beschreibung für diese Signale finden Sie auf Seite 4/5 oder auf unserer Webseite **www.ams-ag.de** im Menüpunkt **Grundlagen Magnetfeldtherapie**.

← Umwelt-
signale

Die MAGNETO-
Schleife gibt
das pulsierende
Magnetfeld ab



Übertragung von Bioinformationen

Zum **MEDISEND®super** gibt es **passendes Zubehör**, das **zum Teil im Lieferumfang enthalten** ist. Einige andere Zubehöerteile können Sie **optional** dazu erwerben.

→ **MAGNETO-Schleife** zur Übertragung des pulsierenden Magnetfeldes (im Lieferumfang enthalten):

Um das pulsierende Magnetfeld für eine Anwendung nutzen zu können, muss ein Applikator - z.B. die **MAGNETO-Schleife** - angeschlossen sein. Durch sie wird das Magnetfeld abgegeben. Sie wird für die Anwendung **auf oder neben den Körper** gelegt.

Der **physiologische Wirkungskreis** des von der Schleife abgegebenen elektromagnetischen Feldes reicht bis zu 2 m im Durchmesser. Es ist **weder sicht- noch hörbar**. Sehr sensible Menschen spüren manchmal etwas - das muss aber nicht sein.

Informations-
übertragung →

Ein pulsierendes Magnetfeld hat die Fähigkeit, **Informationen transportieren und übertragen** zu können. Dies ist vergleichbar mit den Funkwellen aus dem Fernsehen oder dem Radio: Hierbei erfolgt eine Übertragung von Bild und Ton durch eine modulierte Trägerwelle (z.B. UKW-Frequenzen). Im Rahmen der Bioresonanz nach Dr. Ludwig wird das pulsierende Magnetfeld zusätzlich als **Trägerwelle für Bioinformationen** genutzt. Man bezeichnet es als „Einschwingen“ von **exogenen** (körperfremden) oder **endogenen** (körpereigenen) Bioinformationen.

Um das Magnetfeld auch als **Transportschiene im Sinne der Bioresonanz** nutzen zu können, werden **MEDICUP** und **Handelektroden** an das Gerät angeschlossen.

MEDICUP für
exogene
Information →



→ **MEDICUP** für die exogene Informationsübertragung (optional erhältlich):

An das **MEDISEND®super** lässt sich ein Becher - der **MEDICUP** - anschließen, um **exogene Informationen** mit dem pulsierenden Magnetfeld zu übertragen. Hierzu stellen Sie die Mittel (z.B. Homöopathika) am besten in einer Ampulle oder einem Glasröhrchen hinein. Sobald die Anwendung mit dem Gerät gestartet wird, fungiert das elektromagnetische Feld nicht nur als **Anwendungssignal**, sondern gleichzeitig auch als **Transportwelle** für jene Informationen, die sich im MEDICUP befinden. Die Übertragung der Informationen ist **unabhängig davon**, welche Frequenz Sie wählen: **Jede Frequenz ist Trägerwelle** und kann zum Einschwingen/Übertragen eingesetzt werden.

Handelektroden
für endogene
Information →



→ **Handelektroden** für die endogene Informationsübertragung (optional erhältlich):

Mit Hilfe von angeschlossenen **Handelektroden** können Sie mit dem pulsierenden Magnetfeld auch **endogene (körpereigene) Informationen** übertragen. Über den **symmetrischen Hautkontakt** (rechte und linke Körperhälfte) werden die endogenen Bioinformationen durch die Handelektroden abgegriffen und in Form von „**Aufmerksamkeitssignalen**“ im Sinne der Bioresonanz an den Körper zurückgeführt. Die Handelektroden dienen dazu, die Informationen des kompletten Körper-Biofeldes **aufzunehmen**. Diese aufgenommenen Informationen werden auf das von der Schleife abgegebene Magnetfeld moduliert und mit diesem wieder **an den Körper zurückgegeben**.

Die Anwendung des pulsierenden Magnetfeldes in **Kombination mit endogenen und exogenen Informationen** fördert z.B. ganz besonders **Ausleitungsprozesse**.

Digitale Übertragung: MEDISEND®super C mit dem AMScomsystem



Eine Weiterentwicklung des **MEDISEND®super**-Gerätes ist das **MEDISEND®super C**. Beide Geräte unterscheiden sich nur in einer einzigen Eigenschaft: Das **MEDISEND®super C** hat eine **Schnittstelle**, an die man einen **Computer mit dem AMScomsystem** anschließen kann, um **digitalisierte Mittel** zur Anwendung zu nutzen. Abgesehen von dieser Schnittstelle handelt es sich um baugleiche Geräte mit **denselben Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten**.

Mit dem **MEDISEND®super C** ist es möglich, neben analogen auch **digitalisierte Substrate zur exogenen Informationsübertragung** zu nutzen. Wir haben hierfür die Software **AMScomsystem** entwickelt und weit über 6.000 Präparate (Homöopathika, Bachblüten, Nosoden, Phytotherapeutika usw.) digitalisiert. Diese digitalisierten Mittel nennen wir **BIOWAVES**, die wir in unterschiedlichen Paketen zusammengestellt haben. Sie steuern Ihr **MEDISEND®super C** durch den **Computer** und übertragen während der Anwendung mit Hilfe des Magnetfeldes die gewählten **BIOWAVES** als exogene Bioinformationen.

Laptop mit AMScomsystem (ohne BIOWAVES) inkl. 19% MwSt.: 2.890,-
Die **BIOWAVE**-Pakete sind separat erhältlich. Eine komplette Auflistung aller digitalisierten **BIOWAVES** enthält unser **BIOWAVE-Katalog**.

Bitte beachten Sie:

Das **MEDISEND®super** lässt sich nachträglich **nicht** mit einer Schnittstelle für den Computeranschluss nachrüsten. Wenn Sie sich die Möglichkeit zur Nutzung des Computers für die Zukunft offen lassen, ihn aber nicht sofort kaufen möchten, sollten Sie gleich in das **MEDISEND®super C** investieren.

Preis MEDISEND®super C inkl. 19% MwSt.: 5.320,- €

Sollten Sie Interesse am **MEDISEND®super C** und dem **AMScomsystem** haben, rufen Sie uns an, damit wir Sie entsprechend beraten können.
Tel.: 07934 / 99 34 89-0

Kombination mit Kleingerät

Das **METRONOM C** (s. Seite 13) ist eines unserer handlichen **Kleingeräte** und lässt sich besonders gut mit dem **MEDISEND®super C** kombinieren. Es hat fünf Programme und verfügt über einen Speicherplatz, auf dem sich mit dem **MEDISEND®super C** in Kombination mit der **AMScomsystem**-Software ein **BIOWAVE** abspeichern lässt. Während der Anwendung des **METRONOM C**-Gerätes kann der darauf gespeicherte **BIOWAVE** zu jedem der fünf Programme hinzugeschaltet werden. Die Information des **BIOWAVES** wird auf das abgegebene Magnetfeld aufmoduliert und somit übertragen. Manche Therapeuten nutzen es als Leihgerät für ihre Patienten.

Preis METRONOM C inkl. 19% MwSt.: 649,- €



MEDISEND®super

Technische Daten:

Magnetfeld-frequenzen:	Bandbreite 0,1 - 1000 Hz, zwei Frequenz-durchläufe: 1000 - 1 Hz und 100 - 1 Hz
Physiologische Reichweite:	bis zu 2 m im Durchmesser
Batterie:	eingebauter Hochleistungsakku
Gewicht:	1,5 kg ohne Applikator
Größe:	26,5 x 19 x 10,6 cm
Lieferumfang:	Steuergerät MEDISEND®super , Applikator (MAGNETO-Schleife), Akku-Ladgerät, Gebrauchsanweisung

**Nicht im Liefer-
umfang enthalten:** MEDICUP und Handelektroden
Sie sind als Zubehör **optional** erhältlich.

Garantie: 2 Jahre

Preis:

		inkl. 19% MwSt.
Preis netto:	3.882,35 €	
Preis inkl. 19% MwSt.:	4.620,- €	
Versandkosten:	15,- €	Bestell-Nr. 201

Zubehör (optional):

MEDICUP:	zweipoliger Becher (Höhe 7 cm, Durchmesser 5,5 cm), Anschlusskabel (18 cm)
Preis inkl. 19% MwSt.:	350,- €
zwei Handelektroden:	aus V2A Stahl (Länge 10 cm, Durchmesser 2 cm), Anschlusskabel (2 m)
Preis inkl. 19% MwSt.:	220,- €

Gut zu wissen: Bei gleichzeitigem Kauf von Groß- und Kleingerät erhalten Sie auf das Kleingerät 10% Sonderrabatt.

Unser Leasingangebot

Um auch größere Anschaffungen für Sie besser möglich zu machen, bieten wir Ihnen ein auf Ihre Bedürfnisse hin individuell zugeschnittenes Finanzierungsmodell an. Grundsätzlich können Sie neben der Bar- und Ratenzahlung auch ein sehr günstiges Leasing-Modell in Anspruch nehmen. Damit reagiert die AMS auf die rigide Bankenpolitik, die es immer schwieriger macht, Neuanschaffungen in einem überschaubaren Investitionsrahmen finanzieren zu können.

Unser Angebot:

Sie können sämtliche Geräte direkt bei der AMS GmbH als Vertragspartner leasen - ganz ohne eine zwischen-geschaltete Leasinggesellschaft.

Der Leasing-Vertrag basiert auf folgenden Bedingungen:

- Der Mindestbestellwert beträgt: 2.000,- €
(Es können somit auch mehrere Kleingeräte „im Paket“ geleast werden.)
- Es erfolgt eine Anzahlung von 20% des Kaufpreises (Mietsonderzahlung).
- Die monatliche Leasingrate bei 48 Monaten Laufzeit (36, 54 oder 60 Monate Laufzeit auf Anfrage) beträgt derzeit (Stand vom 01.10.2024) nur 2,3% und wird selbstverständlich über die gesamte Laufzeit garantiert.
- Sollte sich das Zinsniveau am Tag des Vertragsabschlusses entscheidend verändert haben, erfolgt eine entsprechende Anpassung des Leasingfaktors.

Beispiel für die Errechnung einer monatlichen Leasingrate:

Angenommener Kaufpreis: 4.000,- €

Mietsonderzahlung bei Vertragsabschluss: 800,- €

Monatliche Leasingrate (Vollamortisation): $2,3\% \times 3.200,- \text{ €}$ ergibt 73,60 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich z.Zt. 19% MwSt.

Eine einwandfreie Bonität ist selbstverständlich Voraussetzung.

Am Ende der Laufzeit kann das Gerät zurückgegeben oder gegen Zahlung eines geringen Restwertes übernommen werden.

Bei einem Leasing-Vertrag zwischen der AMS und Ihnen fallen keinerlei versteckte Kosten (wie z. B. eine „einmalige Bearbeitungsgebühr“) an.

Wasseraufbereitung

Liebe Wasserfreunde,

seit einigen Jahren bekommt das Thema **Wasseraufbereitung** immer mehr Aufmerksamkeit. Schon immer hat das Wasser auch für die AMS eine besondere Bedeutung eingenommen, die sich in der Vergangenheit noch weiter vertieft hat. In unserer Produktpalette finden sich inzwischen einige Produkte rund um das Wasser, die uns besonders ans Herz gewachsen sind (s. unten).

Es ist nicht überraschend, dass Wasser so eine **große Wichtigkeit** hat. Zwei Drittel unseres Körpervolumens bestehen aus Wasser. Allerdings ist ein Wassermolekül so klein, dass Sie - wenn Sie alle Moleküle Ihres Körpers zählen wollten - darauf kämen, dass 99% Ihrer Moleküle Wassermoleküle sind.

Wasser unterstützt den Körper nicht nur durch seine Eigenschaft als **Lösungsmittel bei chemischen Reaktionsabläufen**, sondern dient gleichzeitig als **Informations- und Energiespeicher**.

Dies macht zwei Dinge deutlich:

- Unser Trinkwasser sollte zum einen möglichst unbelastet - sprich **frei von Schadstoffen** - sein.
- Es ist äußerst hilfreich, wenn das Wasser zusätzlich auch eine **bioenergetisch gesunde Struktur** aufweist.

Zu diesem Zweck bietet Ihnen die AMS unterschiedliche **Produkte zur Wasseraufbereitung**, die sich ideal ergänzen.

Da es sich um ein überaus komplexes, spannendes und auch wichtiges Thema handelt, haben wir uns entschieden, in diesem Katalog den Informationsgehalt dazu ausschließlich auf die Angabe unserer Produkte und Preise zu beschränken und nicht im Detail auf Beschreibungen einzugehen. Für alle **tiefergehenden Erklärungen haben wir einen eigenen „Wasser-Katalog“ erstellt**, in dem Sie alle **Informationen zur Wasseraufbereitung sowie Details zu Produkten und Zubehör** finden.

Sollten Sie den Wasser-Katalog noch nicht von uns erhalten haben, können Sie ihn selbstverständlich telefonisch oder per E-Mail als gedrucktes Exemplar anfordern oder aber auf unserer Webseite als PDF-Datei herunterladen.

www.ams-ag.de → **Informationen** → **Downloads**



Unsere Wasser-Produkte:

spring-time®premium pro und spring-time®420 pro

Beide Geräte reinigen Ihr Trinkwasser durch **Umkehrosmose** und **energetisieren** es durch einen eingebauten **Magnetfeldgenerator nach Dr. Ludwig®**. Das **spring-time®premium pro** reichert das Wasser darüber hinaus mit **gelöstem Wasserstoffgas** an, um ein negatives Redoxpotential zu generieren.



Preis inkl. 19% MwSt.:

spring-time®premium pro:
€ 3.149,-

spring-time®420 pro:
€ 2.549,-

bluebalance® Wasserstoffgenerator

Besitzen Sie vielleicht schon ein Umkehrosmosegerät und sind ausschließlich an der **Anreicherung des Wassers durch Wasserstoffgas** interessiert? In diesem Fall sollten Sie einen genaueren Blick auf das **bluebalance®** werfen.



Preis inkl. 19% MwSt.:

bluebalance®:
€ 398,-

Strukturmodifizierte Blockmagnete (SBM)

Diese Magnete können Sie einfach an Ihrer **Hauptwasserleitung** anbringen. Sie sorgen dafür, dass **Kalk sich weniger leicht absetzt**. Die Magnete sind nach dem Verfahren von Dr. Ludwig® **strukturmodifiziert** (mit **64 wichtigen Spurenelementen** informiert).



Preis inkl. 19% MwSt.:

**strukturmodifizierte
Blockmagnete:**
€ 99,-

Glucosamine Gold Gel

Drei natürliche Inhaltsstoffe für Ihre Gelenke

Mit den Inhaltsstoffen

- Glucosamin
- Indischer Weihrauch
- Rosskastanie

sorgt das Glucosamine Gold Gel für mehr Beweglichkeit und unterstützt beanspruchte Gelenke.

Pflegt die Haut, versorgt die Gelenke und den gesamten Bewegungsapparat.

Eine sehr bewährte Kombination:

Glucosamine Gold Gel und unser Magnetfeldtherapiegerät **MEDICUR®pro** (S. 11)

Tubenform / Inhalt: 200 ml



Preis:

Preis netto:	25,20 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	29,99 €	
Versandkosten:	0,- €	

29,99 €

Bestell-Nr. 650

ESM-2

Elektrostress-Messgerät

Gerät zur Messung von Körperspannungen



Sie stehen unter Spannung, wenn Sie sich in einem elektrischen Feld aufhalten.

Diese Spannung lässt sich mit dem ESM-2 schnell und einfach messen. Je nach Anzeigewert lassen sich geeignete Maßnahmen ergreifen oder die Wirkung bereits getroffener Maßnahmen fachmännisch überprüfen.

Technische Daten:

Batterie:	9 Volt Blockbatterie
Gewicht:	180 g
Größe:	15 x 9,0 x 3,0 cm
Lieferumfang:	Gerät mit Koffer, Handelektrode, Erdungskabel, Gebrauchsanweisung
Garantie:	2 Jahre

Preis:

Preis netto:	270,- €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	321,30 €	
Versandkosten:	7,- €	

321,30 €

Bestell-Nr. 801

Tensor und Zubehör

Ökotsensor VARIO:

Der Tensor ist durch sein Schraubgewinde im Griff stufenlos **längen-verstellbar** und dient zum Austesten von Frequenzen, homöopathischen Mitteln, Bachblüten u.a. Durch den Korkgriff liegt er angenehm in der Hand und macht es leicht, Schwingungen zu spüren. Die Antenne hat einen Holzring mit grünem Zierstein. Es ist möglich, den Abtastsensor (s.u.) an den Ökotsensor VARIO anzuschließen.

Lieferumfang:

Ökotsensor VARIO, Holzantenne, vergoldet, längenverstellbar zwischen 40 und 57 cm, Transportrolle



Preis:

Preis netto:	66,39 €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	79,- €	
Versandkosten:	7,- €	

79,- €

Bestell-Nr. 702

Abtastsensor zum Anschließen an den Ökotsensor VARIO

Der Abtastsensor mit Korkgriff kann an den Ökotsensor VARIO angeschlossen werden. Die Sensorspitze wird zum Testen auf das betreffende Präparat gelegt. Dadurch können Sie vermeiden, die zu testenden Präparate mit der Hand zu berühren. Dies vereinfacht die Arbeit mit dem Tensor.

Lieferumfang:

Abtastsensor mit Korkgriff und vergoldeter Spitze
Kabel ca. 80 cm



Preis:

Preis netto:	21,- €	inkl. 19% MwSt.
Preis inkl. 19% MwSt.:	24,99 €	
Versandkosten:	7,- €	

24,99 €

Bestell-Nr. 703

Arbeit mit Tensoren Buch zur Anwendung des Tensors

Mit vielen Illustrationen und Beispielen wird gezeigt, wie man mit dem Tensor Lebensmittel und Allergene richtig beurteilt und feine Energieströme erkennt und auswertet.

Preis:

Preis netto:	12,06 €	inkl. 7% MwSt.
Preis inkl. 7% MwSt.:	12,90 €	
Versandkosten:	0,- €	

12,90 €

Bestell-Nr. 413

Haben Sie ein Haustier?

Natürlich lässt sich die Magnetfeldtherapie auch für unsere vierbeinigen Freunde anwenden.

Sie können jedes unserer Geräte für Ihr Tier genauso nutzen, wie für sich selbst.

Legen Sie eines unserer Kleingeräte (z.B. das **MEDISEND®** oder das **METRONOM solar**) neben das Tier auf den Schlafplatz, in das Körbchen oder in den Käfig.

Wählen Sie die passende Frequenz - z.B. ausgleichend, beruhigend oder anregend.

Wenn Sie das Tier gut kennen, spüren Sie oft sehr schnell, ob es die gewählte Frequenz mag und sich wohlfühlt. Tiere haben ein feines Gespür und legen sich gern in die Nähe des eingeschalteten Gerätes. Wenn sie genug haben, entfernen sie sich meist einfach von selbst.

Das Tier muss sich einfach nur in der Nähe des Gerätes aufhalten, um sich in der physiologischen Reichweite des Magnetfeldes zu befinden.

Selbstverständlich können Sie auch für Ihr Tier den Ampullenhalter nutzen, um eine Information mit dem Magnetfeld zu übertragen.

Auch das Großgerät **MEDISEND®super** ist für die Anwendung an Tieren geeignet.

Wenn Sie das **MEDISEND®super** für die Anwendung an einem Großtier nutzen möchten, ist der MAGNETO-Ring als Applikator besonders geeignet. Er lässt sich leicht um den Hals des Tieres legen.



501 MEDICUP

Zweipoliger Becher für exogene Informationsübertragung (z.B. Homöopathika u.a.)

Höhe ca. 7 cm / Ø ca. 5,5 cm

inkl. Anschlusskabel (ca. 18 cm)

Preis netto € 294,12

Preis inkl. 19% MwSt. € 350,-

Versandkosten € 7,-



503 Paar Handelektroden

Zur endogenen Informationsübertragung (körpereigene Information)

inkl. Anschlusskabel (ca. 2 m)

Preis netto € 184,87

Preis inkl. 19% MwSt. € 220,-

Versandkosten € 7,-



504 MAGNETO-Point zur Anwendung bei Kleinflächen

Ø ca. 3,3 cm

Anschlusskabelänge ca. 90 cm

Preis netto € 84,03

Preis inkl. 19% MwSt. € 100,-

Versandkosten € 7,-



505 Flexibler MAGNETO-Ring

insbesondere für Großtiere bzw. großflächige Anwendung

Anschlusskabelänge ca. 2,70 m

Ring-Ø ca. 50 cm

Preis netto € 554,62

Preis inkl. 19% MwSt. € 660,-

Versandkosten € 7,-



506 MAGNETO-Schlaufe

bei **MEDISEND®super** im Preis enthalten

Anschlusskabelänge ca. 2,80 m

Schlaufen-Ø ca. 13 cm

Preis netto € 378,15

Preis inkl. 19% MwSt. € 450,-

Versandkosten € 7,-



Gerätezubehör

509 Paar Tierapplikatoren

Strukturmodifizierte Flächenelektroden für die Anwendung bei Tieren zur endogenen Informationsübertragung (äquivalent zu den Handelektroden) inkl. Doppelstecker

zum Anschluss an das **MEDISEND®super**

Anschlusskabellänge ca. 2,90 m

Preis netto € 260,50

Preis inkl. 19% MwSt. € 310,-

Versandkosten € 7,-



518 Paar Verlängerungskabel für die Tierapplikatoren

Anschlusskabellänge ca. 2,90 m

Preis netto € 75,63

Preis inkl. 19% MwSt. € 90,-

Versandkosten € 7,-



651 Ladegerät für Großgeräte

Das passende Ladegerät für alle Großgeräte der AMS. Erhältlich mit verschiedenen Länder-Steckern.

Preis netto € 43,70

Preis inkl. 19% MwSt. € 52,-

Versandkosten € 7,-



530 Stoßfester Aluminiumkoffer für MEDISEND®super

(geeignet für Reise und Transport) ohne Inhalt

Preis netto € 105,04

Preis inkl. 19% MwSt. € 125,-

Versandkosten € 7,-



512 Ampullenhalter für MEDICUR® pro, METRONOM solar/C und MEDICUR®color (inkl. 3 Glasampullen)

Preis netto € 10,08

Preis inkl. 19% MwSt. € 12,-

Versandkosten € 4,-



Glasampullen

Zur Informationsübertragung

517 50 Stück

Preis netto € 18,49

Preis inkl. 19% MwSt. € 22,-

Versandkosten € 4,-



526 10 Stück

Preis netto € 5,04

Preis inkl. 19% MwSt. € 6,-

Versandkosten € 4,-

525 Vorfilter für spring-time®pro Geräte

Wechselintervall: Alle 6 Monate

Preis netto € 48,74

Preis inkl. 19% MwSt. € 58,-

Versandkosten € 7,-



Literatur

401 Dr. C. Lund: Chronische Krankheiten sind heilbar

Chronische Krankheiten sind heilbar wenn ihre Ursachen gefunden werden und eine kausale Behandlung erfolgt.

Preis inkl. 7% MwSt. € 19,80



408 Dr. med. Uwe Reuter & Dr. med. Ralf Oettmeier: Biologische Krebsbehandlung heute. Sag JA zum LEBEN!

Ein Wegweiser zum Thema Krebserkrankung für Betroffene, Angehörige und zur Vorbeugung.

Preis inkl. 7% MwSt. € 29,-



402 J.-C. Alix: Es geht um Ihre Knochen

Standardwerk der naturheilkundlichen Orthopädie. Rücken- und Gelenkprobleme verstehen, vermeiden, kurieren.

Preis inkl. 7% MwSt. € 24,-



413 Ernst Weberstorfer: Arbeit mit Tensoren

Mit vielen Illustrationen und Beispielen wird gezeigt, wie man mit dem Tensor Lebensmittel und Allergene richtig beurteilt und feine Energieströme erkennt und auswertet.

Preis inkl. 7% MwSt. € 12,90



410 J.-C. Alix: Es geht um Ihren Darm

Ein gesunder Darm ist für ein langes Leben ohne Krankheit einfach Voraussetzung.

Preis inkl. 7% MwSt. € 28,-




417 Prof. Gerald H. Pollack:

Wasser viel mehr als H₂O

Dieses Sachbuch beschreibt erstmals eine bisher unbekannte Qualität unseres Lebenselements Wasser. Pollack ist Professor für Bioengineering und entdeckte einen vierten Aggregatzustand von Wasser. Eine der zentralen Schlussfolgerungen seiner Untersuchungen lautet: Wasser speichert Lichtenergie

Preis inkl. 7% MwSt. € 28,80

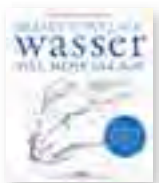

404 W. Ludwig, H. - J. Albrecht

Wasser und Homöopathie

Die Bedeutung der Wasserstruktur als Träger von Informationen

Preis inkl. 7% MwSt. € 30,-



416 Prof. Dr. Klaus Buchner und Dr. med. Monika Krout:

5G WAHN(SINN)

Wie gefährlich ist Mobilfunk im Allgemeinen und 5G im Speziellen?

Und was können wir tun, um uns zu schützen?

Die starke Mobilfunkstrahlung in unserem Land macht zunehmend mehr Menschen, Tiere und Pflanzen krank. Dabei handelt es sich um studienbasierte Fakten.

Preis inkl. 7% MwSt. € 16,95



Bis auf weiteres versenden
wir Buchbestellungen
versandkostenfrei



Zahlungsbedingungen

Inland:

Bankeinzug/ Vorkasse	(3% Skonto)
Nachnahme	(3% Skonto zzgl. 5,- € Nachnahmegebühr)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	
Jeweils zzgl. Porto- und Versandkosten (Klein- und Handgeräte 7,- €, Praxissysteme 15,- €)	

Ausland

evtl. zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer	
Bankeinzug/ Vorkasse	(3% Skonto)
Kreditkarte	(Master/Visa)
PayPal	
zzgl. Porto- und Versandkosten	

Bankverbindung:

Volksbank Main-Tauber BLZ 673 900 00
Konto-Nr. 70 69 98 00
IBAN: DE95 6739 0000 0070 6998 00
BIC: GENODE 61 WTH

Für Auslandsüberweisung:

S.W.I.F.T.-Code (BIC): GENODE 61 WTH
IBAN: DE95 6739 0000 0070 6998 00
Sitz der Bank: D-97877 Wertheim

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Stand: 01.11.2020

1. Geltungsbereich

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen an Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

2. Angebot

Unsere Angebote sind unverbindlich. Die Darstellung der Produkte in unserem Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Kleine Abweichungen und technische Änderungen gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich.

3. Preise, Lieferung und Versandkosten

Es gibt keine Mindestbestellmenge. Alle unsere Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer in Höhe von 19% bzw. 7% (Bücher). Büchersendungen, das „Glucosamine Gold Gel“ (Bestell-Nr. 650) u. die CD-ROM BIOINFORMATIVE MEDIZIN (Bestell-Nr. 406) sind in Deutschland versandkostenfrei. Bei allen anderen Produkten berechnen wir je nach Produkt pauschale Versandkosten innerhalb Deutschlands von 4,- / 7,- / 15,- Euro. Bei Lieferung in andere EG Länder bzw. in alle anderen Länder gelten andere Versandkostenpauschalen.

4. Lieferzeiten

Bestellte Waren kommen innerhalb von ca. 3 Arbeitstagen zum Versand. Auf evtl. abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.

5. Widerrufsbelehrung

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht.

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (AMS GmbH, Hauptstraße 26, 97990 Weikersheim, Telefon 07934/993489-0, Fax 07934/993489-44, E-Mail info@ams-ag.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular auf www.ams-ag.de bei AGBs verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG

UNSERE FREIWILLIGE RÜCKGABEGARANTIE für die Artikel-/Bestell-Nr. 100-107 (MEDISEND, MEDISEND protect, MEDICUR pro, METRONOM solar, METRONOM C, MEDICUR color und CEPES-Laser):

Unbeschadet der Ihnen gesetzlich zustehenden Rechte bietet Ihnen die AMS folgende freiwillige Rückgabegarantie an:

Sämtliche oben genannten Kleingeräte (Artikel-/Bestell-Nr. 100-107) können Sie innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der Ware an die AMS zurücksenden.

Wenn Sie Waren in Übereinstimmung mit dieser freiwilligen Rückgabegarantie zurücksenden, erstatten wir Ihnen den von Ihnen schon geleisteten Kaufpreis, nicht jedoch die Versandkosten Ihres ursprünglichen Kaufes. Voraussetzung ist, dass sich die Ware in einwandfreiem Zustand befindet. Die bestimmungsmäßige Nutzung der Ware ist aber gestattet. Es ist nicht notwendig, gebrauchte Batterien durch neue zu ersetzen. Die Transportgefahr sowie die Rücksendekosten gehen zu Ihren Lasten. Diese erweiterte Rückgabegarantie beschränkt nicht Ihre gesetzlichen Rechte und somit auch nicht Ihr Widerrufsrecht wie oben beschrieben.

Diese freiwillige Rückgabegarantie ist nicht gültig für preisreduzierte Ware und anlässlich von Sonderverkaufsaktionen.

6. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz

Das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) findet auf die AMS auf Grund der Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer keine Anwendung. Die AMS nimmt an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht teil.

7. Zahlungsarten

Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse (Sie erhalten mit der Auftragsbestätigung ein Rechnungs-PDF mit den notwendigen Angaben unserer Bankverbindung und wir liefern Ihnen die Ware nach Zahlungseingang), Nachnahme (nur in Deutschland möglich und nur möglich, wenn Versand per GLS erfolgen kann/darf), Lastschrift / Bankeinzug (europaweit möglich), Kreditkarte (Master und Visa; die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt mit Abschluss Ihrer Bestellung), Paypal (Sie müssen grundsätzlich bei Paypal registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen) und per Rechnung (nur bei Bestandskunden möglich).

8. Haftungsausschluss

Die Nutzung der angebotenen Produkte erfolgt auf eigene Gefahr. Die Produkte ersetzen keinesfalls die Untersuchung und Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Keines der Produkte mit Ausnahme des Produktes MEDICUR pro ist ein Medizinprodukt im Sinne des MPG (Medizinproduktegesetz).

9. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Firma AMS.

10. Datenspeicherung

Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

AMS GmbH

Advanced Medical Systems
Hauptstraße 26
D-97990 Weikersheim



Melden Sie sich bei uns, wenn Sie Fragen haben.

Wir sind gern für Sie da.

Montags bis donnerstags	8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitags	8.00 Uhr bis 14.30 Uhr

Tel.:	0 79 34 / 99 34 89-0
Fax:	0 79 34 / 99 34 89-44
E-Mail:	info@ams-ag.de
Webseite:	www.ams-ag.de

Im Internet finden Sie auch unseren Onlineshop, unseren Messekalender und Seminartermine sowie viele weitere ausführliche Informationen.