

METRONOM C



MANUAL DE USO



ADVANCED
MEDICAL
SYSTEMS

AMS GmbH
Hauptstr. 26
D-97990 Weikersheim

FON: +49 79 34-99 34 89-0
FAX: +49 79 34-99 34 89-44
E-Mail: info@ams-ag.de
www.ams-ag.de

Conteúdo	página
1.0 Manual de uso	3
1.1 Princípios de manuseio e de aplicação	4
1.2 Frequências – possibilidades de aplicação	6
1.3 Suporte para ampolas	8
1.4 Armazenagem / Apagar uma BLOWAVE	9
1.5 Dados técnicos	16
1.6 Trocar a bateria	17
1.7 Garantia	17
1.8 Cuidados	17
1.9 Examinar a funcionalidade	17

**Por favor, antes de usar o
METRONOM C
leia o manual de uso !**

**Para satisfazer as exigências legislativas, declaramos que a terapia
do campo magnético não está comprovada cientificamente e nem
reconhecida pela medicina convencional.**

**Tem mais perguntas?
Ligue para nossa HOT-LINE:
FON: +49 (0)9341 / 92930-0 FAX: +49 (0)9341 / 92930-99
De segunda a quinta-feira das 8.00h às 17.30 h
Sexta-feira das 8.00h às 15.00 h**

1.0 Manual de uso

O **METRONOM C** é um campo magnético de bolso que libera sinais eletromagnéticos através de uma bateria. O aparelho é pequeno e portátil, e pode cuidar do seu bem-estar total de forma natural.

Em todo o mundo, o **METRONOM C** é o único campo magnético de bolso com um programa básico automático. Além disso, dispõe de mais quatro programas de frequências singulares e com a **capacidade de memória** para uma BLOWAVE (veja a página 6 e seguintes).

Uma **BLOWAVE** pode ser ligada ou desligada conforme a necessidade. Obviamente, uma BLOWAVE armazenada pode ser deletada ou substituída por uma outra **BLOWAVE**.

Para transmitir um arquivo BLOWAVE, necessita-se de um aparelho AMS que possui o software de comando respectivo **AMScomsystem**.

Além disso, o **METRONOM C** possui três normais biológicas: o espectro das frequências Schumann-, geomagnéticas e solar.

Com o **METRONOM C** você pode:

- adquirir novamente energia, bem-estar e vitalidade de forma natural
- usar o campo magnético pulsante com bio-informações adicionadas
- ativar e reforçar seu processo de auto-cura e harmonizar seu organismo
- aumentar a capacidade física e mental (concentração e atenção)
- ativar a desintoxicação do seu organismo

1.2 Princípios de manuseio e de aplicação

O **METRONOM C** cuida de forma natural do seu bem-estar, através do programa automático “Sol” e das frequências solares. Outros quatro programas permitem o uso individual, conforme a situação respectiva em caso de: “falta de energia e fadiga”, “falta de concentração e desatenção”, “relaxamento e inquietação interna” / “eletrossensibilidade e poluição eletromagnética” (veja 1.2 Frequências – possibilidades de aplicação).

Com seus cinco programas (veja 1.2 Frequências – possibilidades de aplicação), o **METRONOM C** faz parte da nova geração dos Zappers dos aparelhos eletromagnéticos pequenos e de bolso, que também alcança o espaço intracelular (!).

Ele se baseia nas pesquisas de Royal RIFE e Hulda R. CLARK (EUA), que mencionam que todos os microrganismos (por exemplo, fungos, bactérias, vírus) possuem uma frequência vibratória própria. Na posição “Sol” (veja 1.2 Frequências – possibilidades de aplicação), o **METRONOM C** passa automaticamente por todas as assim chamadas frequências RIFE até 10MHz (em ondas superiores).

Ligar:

Para ligar o aparelho, aperte o botão ON/OFF. Após um auto-teste, que liga todos os LED na sequência, a última frequência escolhida pisca e o aparelho está pronto.

O **METRONOM C** dispõe de cinco frequências diferentes, que podem ser escolhidas através do botão “SEL”. As frequências são marcadas através de cinco símbolos diferentes (veja 1.2 Frequências – possibilidades de aplicação). Quando a função **WAVE** estava ou está ativada, o LED verde acima do botão WAVE acende. Apertando o botão WAVE, a transferência da BIOWAVE pode ser ativada ou desativada, através da escolha anterior do programa de frequência (botão SEL). Apertando o botão ON/OFF, o aparelho pode ser ligado ou desligado a qualquer momento.

O **METRONOM C** desliga automaticamente após 30 minutos; porém, pode ser ligado imediatamente outra vez. Mudando a frequência escolhida durante o funcionamento, o aparelho não inicia novamente os 30 minutos. Conforme a frequência escolhida, o LED verde pisca mais rápido ou mais devagar (veja Frequência programada).

Obtivemos as seguintes sugestões (veja 1.2 Frequências – possibilidades de aplicação) através do uso dos nossos aparelhos, realizado durante muitos anos. Em primeiro lugar, é importante você saber que o alcance fisiológico do **METRONOM C** é de aproximadamente 40 cm. Seu campo magnético pode ser usado em cima da roupa, e ele pode ser colocado tanto pela parte anterior como posterior.

Para o uso *preventivo*, aconselhamos o uso diário pela manhã durante 10 minutos até uma hora, próximo ao corpo (observar o desligamento automático após 30 minutos!). O **METRONOM C** poder ser usado várias vezes por dia, por exemplo, para ativar a auto-defesa ou para relaxar; de preferência próximo ao timo (veja abaixo),





ou em cima do plexo solar, ou próximo a um foco de dor. Ele pode ser fixado através da atadura anexa.

O timo está localizado no meio do peito, exatamente atrás da parte superior do osso esterno. O plexo solar, o plexo do sistema nervoso simpático que faz parte do sistema nervoso vegetativo, está localizado a aproximadamente dois dedos transversos acima do umbigo. O timo é um órgão importante para a defesa imunológica. Ele também é responsável pelo fluxo linfático no organismo.

O timo controla e regula o fluxo energético dentro do sistema energético do corpo; ele inicia imediatamente as correções para eliminar um desequilíbrio.

1.2 Frequências – possibilidades de aplicação

O aparelho ligado fornece as seguintes possibilidades:

SÍMBOLO	Frequência em Hz com as três normais biológicas	Função:
 "Sol"	Frequências contínuas automáticas: de cerca de 1000 Hz diminuindo até cerca de 1 Hz, depois novo reinício. Uma passagem dura aproximadamente 7,5 segundos. Com ondas superiores até 10 MHz	“Programa bioenergético básico“ Estabilização, harmonização do organismo, ou seja, do sistema nervoso vegetativo. Com „Função Zapper“
 "Força"	33	“estimulador ” Em caso de desânimo e fadiga, falta de energia, Fitness (energiza)
 "YIN / YANG"	7,8	“equilibra / estabiliza" Terapia da dor, falta de concentração, desatenção, sensibilidade climática, jetlag; energização de alimentos que contêm água.
 "LUA"	3,0	"calmante" Terapia da dor com sedação simultânea, inquietação interna, relaxamento, ajuda para dormir
 "CELULAR"	1,2	“relaxante“ Inflamações, eletrossensibilidade, (por exemplo, trabalho no computador), relaxamento profundo, „Frequência Nogier“

À noite e para dormir, aconselha-se usar somente a frequência „LUA“. Para adormecer ou durante o sono, o **METRONOM C** pode ser colocado debaixo do travesseiro. Ele se desliga automaticamente após 30 minutos.

O **METRONOM C** vem acompanhado com uma atadura. Em caso de dor, fixe a atadura com o velcro no local da dor e coloque o **METRONOM C** entre a atadura e o local a ser tratado.

A amplitude do **METRONOM C** é de 40 cm (diâmetro 80 cm), podendo ser usado acima da roupa. Durante a aplicação, aconselha-se a relaxar, sentado ou deitado.

Aconselhamos beber bastante água pouco mineralizada, de preferência em goles pequenos, porque o **METRONOM C** ajuda também na desintoxicação do organismo.

Os programas podem ser mudados a qualquer momento.

Você pode tornar os sinais audíveis ativando, por exemplo, o símbolo „SOL“ e colocando o **METRONOM C** próximo a um rádio transistor ligado em onda média. Assim, você escuta o ciclo do **METRONOM C** no rádio, que começa com sons altos baixando para os baixos.

1.3 Suporte para ampolas

O suporte para ampolas está incluído na embalagem do **METRONOM C**. Para instalar o suporte no lado posterior do aparelho, solte os dois parafusos atrás na parte superior com uma chave de fenda adequada. Para fixar a peça use os parafusos anexados.

Use um dos frasquinhos de vidro para encher a substância escolhida (por exemplo, uma substância homeopática) colocando-o depois no suporte.

ATENÇÃO! Cuidado para não quebrar o frasco! Introduza o frasquinho de cima para baixo, nunca pressione o da frente. É suficiente encher o frasquinho até a metade. Pesquisas com espectroscópio comprovam que o campo magnético pulsante gerado pelo **METRONOM C** está sendo modulado através da vibração própria da substância (veja 2.0 – Frequências geomagnéticas).

O campo magnético pulsante do **METRONOM C** transporta as vibrações eletromagnéticas que a substância contida no frasquinho emite permanentemente (causado pelo assim chamado „Movimento molecular Brown“).

Essa modulação acontece independentemente da frequência escolhida. Isso significa, que você escolhe a frequência conforme a necessidade ou sua experiência positiva, mesmo usando o suporte para ampolas. Pode introduzir uma corda pelos dois furos para poder pendurar o aparelho no pescoço.

1.4 Armazenar / Deletar uma BIOWAVE

O **METRONOM C** dispõe de capacidade para armazenar uma **BIOWAVE**.


A BIOWAVE é uma bio-informação digitalizada, que pode ser modulada e transferida para o campo magnético pulsante (veja cinco programas do **METRONOM C**).

Bioinformações são espectros de frequências digitalizadas de substratos como substâncias homeopáticas, bioterápicos, Florais de Bach etc.

Em seguida, uma breve descrição do funcionamento do METRONOM C, em conexão com o armazenamento e eliminação de uma BIOWAVE.

O primeiro passo é uma breve explicação da função dos elementos de manuseio elementares.

Visão dos elementos de manuseio – Localização da conexão da interface para fazer o download da BIOWAVE

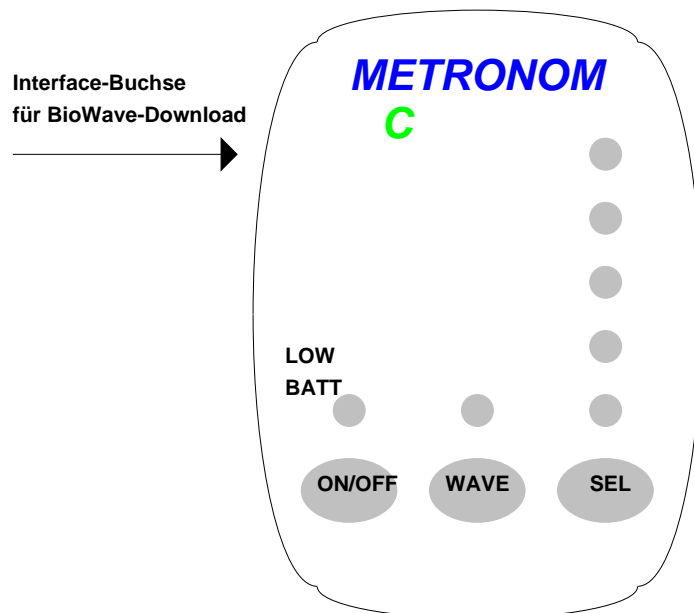


A conexão da interface para fazer o download da BIOWAVE está localizada no lado externo esquerdo lateral do aparelho.

Atenção!

As BIOWAVES somente podem ser armazenadas através do software de comando **AMScomsystem** e um aparelho grande AMS (**MEDISEND super III, MEDISEND super C ou WAVE TRANSFER C**).

Botão **ON/OFF** / LED **Low Battery** – Condição de funcionamento / Estado de carga da bateria

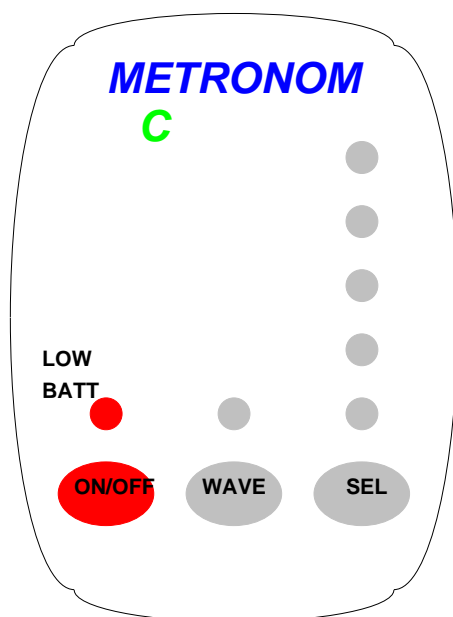

Você liga o **METRONOM C** através do botão **ON/OFF**. Após apertar o botão **ON/OFF**, o aparelho realiza um auto-teste em que todos os LED piscam na sequência. Após esse auto-teste, o aparelho permanece no programa que foi usado por último com o LED respectivo piscando.

Durante o uso, o aparelho pode ser desligado a qualquer momento através do botão **ON/OFF**. Nesse caso, o **LED Low Battery** pisca rapidamente.

O **LED Low Battery** mostra o estado da bateria:


LED desligado

LED pisca vermelho

Bateria ok

Bateria fraca, por favor, trocá-la


Botão **SEL** e os LED correspondentes

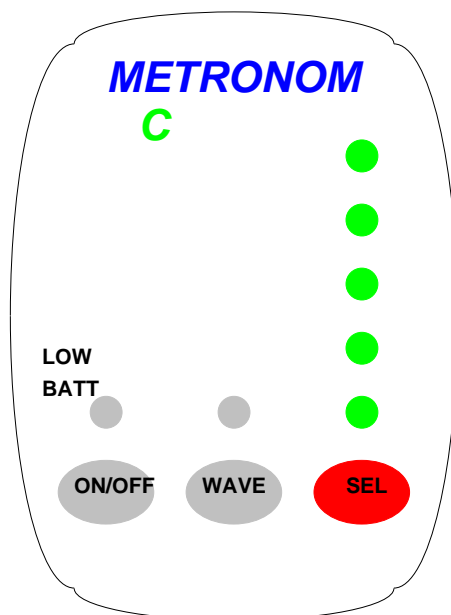

Apertando o botão **SEL**, uma das cinco frequências programadas permanentes do campo magnético pode ser iniciada. O programa atual escolhido será mostrado através de um dos 5 LED acima do botão **SEL**.

Apertando o botão SEL permanentemente, inicia-se automaticamente uma auto-continuação.

Botão **WAVE** e o LED correspondente

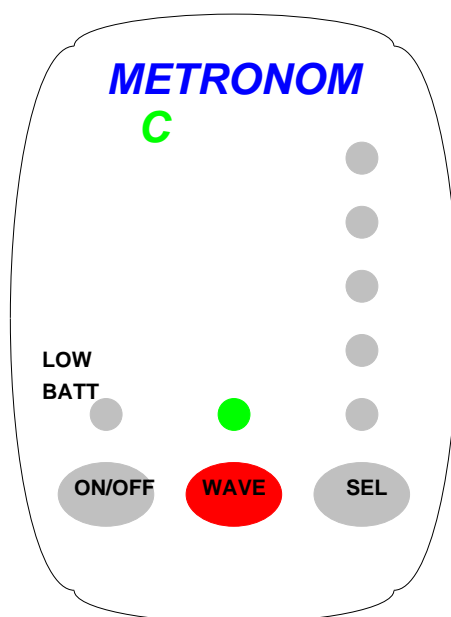

Apertando o botão WAVE, uma BIOWAVE programada anteriormente pode ser gerada paralelamente às frequências magnéticas normais. Apertando o botão novamente, desliga-se a atividade da BIOWAVE.

Quando a BIOWAVE está ativada, o LED acima do botão WAVE permanece ligado constantemente; desativando a transmissão da BIOWAVE, ele continua desligado.

Quando nenhuma BIOWAVE está programada no aparelho, o LED acima do botão WAVE pisca apenas 3 vezes, permanecendo depois desligado.

O Auto Shut Down – Desligamento automático

O aparelho se desliga automaticamente após 30 minutos, para evitar uma descarga completa da bateria.

Armazenar uma BIOWAVE no METRONOM C

A transmissão de um arquivo BIOWAVE através de um aparelho grande AMS dos tipos

**MEDISEND super C ou
MEDISEND super III ou
WAVE TRANSFER C**


somente é possível através do software de comando *AMScomsystem!*

Como armazenar uma BIOWAVE (veja a seguinte ilustração):

1. Desligar o METRONOM C!

2. Use o cabo anexado ao grande aparelho. Use somente esse cabo, outros cabos podem causar graves defeitos.

Conecte um lado do cabo no plugue nomeado „PD“, localizado atrás do aparelho grande, e o outro lado no plugue localizado no lado esquerdo do METRONOM C.

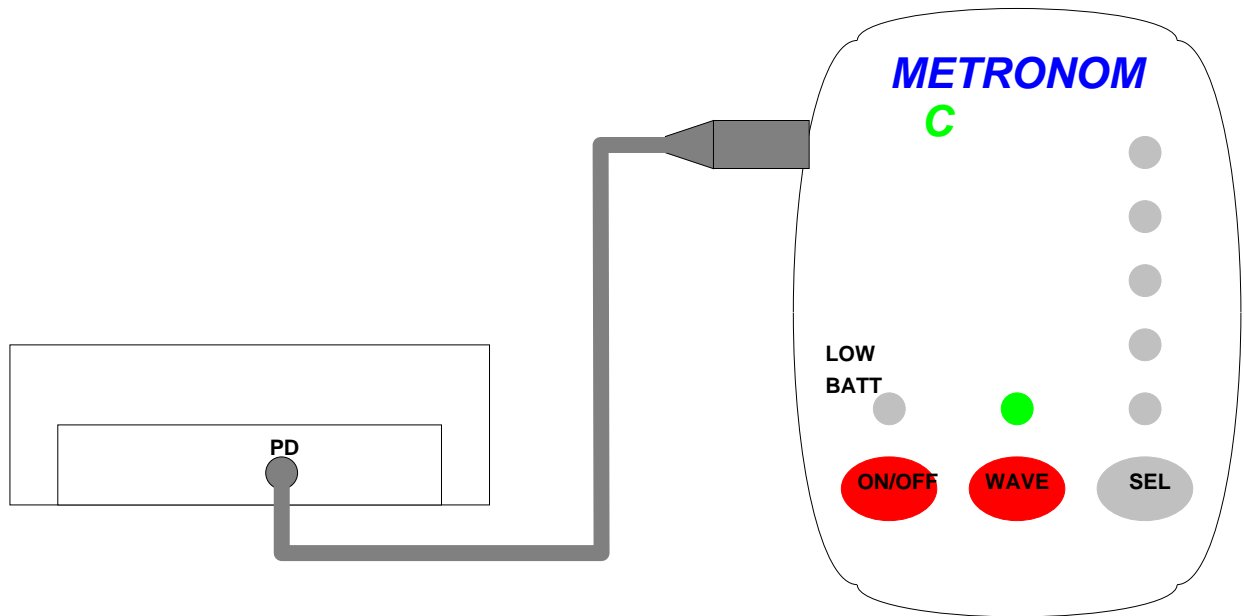

3. Agora, aperte continuamente o botão WAVE, em seguida brevemente o botão ON/OFF e continue apertando o botão WAVE por aproximadamente mais um segundo até que o LED acima do botão WAVE permaneça constantemente ligado. Esse estado continua até o início do DOWNLOAD através do software.

4. Para continuar o download da BIOWAVE, veja o manual do software de comando *AMScomsystem*.

5. Durante o DOWNLOAD, o LED acima do botão WAVE pisca. Após o término do DOWNLOAD, o LED acima do botão WAVE continua ligado por aproximadamente mais dois segundos, depois o aparelho se desliga.

Atenção:


1. Nunca se conecte a um aparelho grande AMS, quando não quiser iniciar um DOWNLOAD. Se isso acontecer, as informações das BIOWAVES armazenadas no METRONOM C podem ser destruídas.

2. Durante o DOWNLOAD, observe o LED acima do botão WAVE. Ele indica um DOWNLOAD sem problemas. Quando esse LED não começa a piscar durante o DOWNLOAD, as causas podem ser as seguintes:

- A conexão com o aparelho grande AMS não foi realizada. Observe se os dois plugues estão totalmente conectados.
- O DOWNLOAD através do software de comando *AMScomsystem* não foi iniciado.

Deletar uma BIOWAVE no METRONOM C

Como as BIOWAVES programadas geralmente são transmitidas especificamente para a necessidade da respectiva pessoa, aconselha-se deletar a BIOWAVE programada antes de usar o aparelho para outra pessoa. Para fazer isso, siga as seguintes instruções:

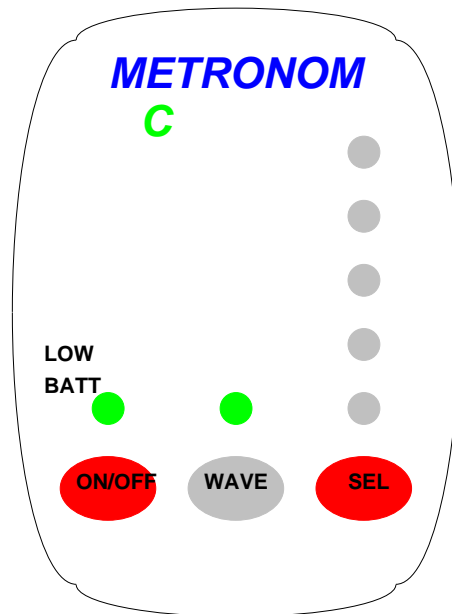


Desligar o aparelho.

Aperte continuamente o botão **SEL** e brevemente o botão **ON/OFF**, continue apertando o botão **SEL** por mais **5 segundos** até que o **LED LOW BATTERY** apague. Agora, os dois LED LOW BATTERY e WAVE começam a piscar alternadamente.


Se você realmente quer deletar a BIOWAVE programada, aperte agora o botão WAVE. A BIOWAVE será deletada e o aparelho se desliga.

Se você quer interromper o processo de deletar, ou seja, se não quiser apagar a BIOWAVE, desligue o aparelho apertando o botão ON/OFF.

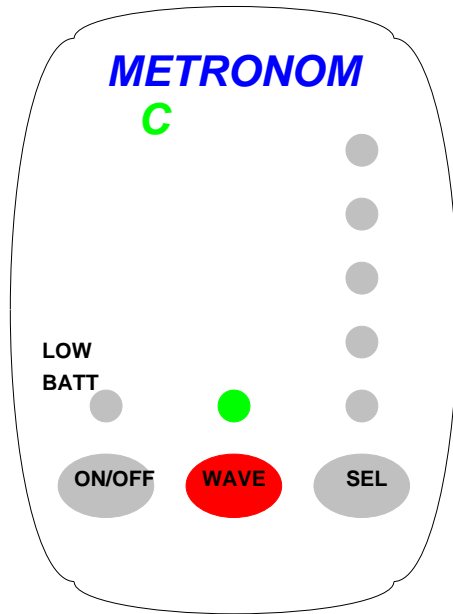

BioWave löschen

Para deletar a BioWave

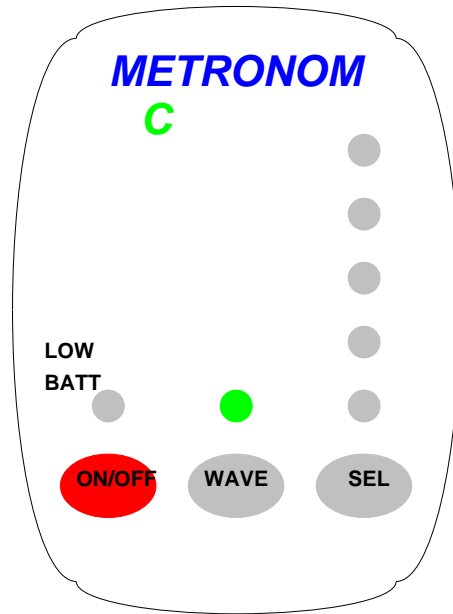

BioWave **NICHT** löschen

Se não quiser deletar a BioWave

1.5 Dados técnicos



Conteúdo da embalagem:	METRONOM C , incluindo bateria de 9 V, atadura elástica com velcro e manual de uso
Tamanho:	25 mm x 76 mm x 110 mm
Peso aproximado:	119 g
Frequências:	2 Hz / 2.000Hz 3 Hz / 2.000 Hz 7,8 Hz / 2.000 Hz 33,0 Hz / 2.000 Hz passagem automática das frequências 1000 Hz – 1 Hz em aproximadamente 7,5 sec.
Direção do campo magnético:	simétrico horizontal ao comprimento do eixo
Precisão (Frequências fixas):	± 0,2%
Função do temporizador:	Desligamento automático após aproximadamente 30 minutos para todas as frequências, precisão de aproximadamente 1%
Recebimento médio da força elétrica:	2,5 mA; quando desligado em „stand-by“: 41 µA
Amplitude do campo magnético:	conforme programa de 0,17 – 3,8 µT
Distância de medição:	0 m.
Tempo útil da bateria:	usando o aparelho 3 vezes ao dia, aproximadamente três meses

Seu produto foi produzido com materiais e peças de alta qualidade, que podem ser reciclados e usados novamente.

Por favor, observe os regulamentos locais e não elimine seus aparelhos antigos junto com o lixo normal da casa. A eliminação correta ajuda a evitar possíveis sequelas negativas para o meio ambiente e a saúde humana.

1.6 Troca da bateria

Quando a bateria está ficando fraca, o aviso "LOW BATTERY" fica ligado permanentemente. (Por favor, não confunda isso com o auto-teste quando se liga o aparelho!) Abra o local da bateria no verso do aparelho e troque a bateria. Preste atenção na polaridade e coloque a bateria de forma correta.

Tipo de bateria: Varta 3022/4022, GP1604G ou Ever Ready PP3 (9V bateria quadrada).

1.7 Garantia

2 anos de garantia a partir da data da aquisição e em uso adequado, excluindo as baterias.

1.8 Cuidado

- **Não** coloque o aparelho ligado perto de cartões de banco ou telefônicos com faixa magnética, porque elas podem ser apagadas.
- Não coloque o seu **METRONOM C** em contato com líquidos, fogo ou calor.
- Não use o aparelho próximo a materiais facilmente inflamáveis.
- Não ligue o aparelho no avião, durante a decolagem ou aterrissagem.
- Não ligue o aparelho nos controles em aeroportos etc.
- Para limpar o aparelho, use um pano úmido e um sabão suave.
- Cuidado! Usando o aparelho em áreas contaminadas por eletromagnetismo, o sinal de uso do **METRONOM C** pode ser alterado.

Quando o **METRONOM C** estiver fora de uso por um período mais longo, aconselhamos tirar a bateria para evitar o vazamento da mesma e a danificação do aparelho.

O **METRONOM C** não contém materiais perigosos e pode ser eliminado no final do seu tempo de uso como lixo eletrônico.

Atenção!

Contra-indicação: em pacientes com marcapasso, em insuficiência coronária (insuficiência do coração / insuficiência do músculo cardíaco) e durante a gravidez.

Obviamente, o **METRONOM C** não pode ter êxito em todas as pessoas. Quando o **METRONOM C** não foi de ajuda após várias aplicações, a causa profunda deve ser examinada e tratada.

O **METRONOM C** não é um produto medicinal conforme o MPG (Lei de Produtos Medicinais). O **METRONOM C** pode apenas influenciar positivamente sua

capacidade de regulação. O uso do **METRONOM C** está sob sua própria responsabilidade e jamais substitui o exame e o tratamento de um médico ou naturopata.

1.9 Exame de função

Porque o LED não pisca quando o aparelho está ligado?

Causa: Capacidade da bateria esgotada.

Ajuda : Trocar a bateria de 9 V

Se, mesmo assim, o seu **METRONOM C** não funciona – entre em contato conosco ou devolva o aparelho, descrevendo o defeito junto com o certificado de garantia e a cópia da nota fiscal para **AMS** GmbH, Hauptstr. 26, D-97990 Weikersheim. Entraremos em contato com você o mais breve possível!