

MEDISEND®

Con Timer



MANUALE D'USO

**Prima di utilizzare il
MEDISEND®
Si prega di leggere le istruzioni!**

L'uso è approvato nei paesi della CEE



ADVANCED
MEDICAL
SYSTEMS

AMS GMBH
HAUPTSTR. 26
97990 WEIKERSHEIM
GERMANY

Tel: +49 (0) 79 34 / 99 34 89-0
FAX: +49 (0) 79 34 / 99 34 89-44
E-MAIL: info@ams-ag.de
www.magnetotherapy.de

CONTENUTO	Pagina
1. Come usare il MEDISEND®	2
1.1. Funzionamento di base.....	2
1.1.1. Programmare lo spegnimento automatico	3
1.2. Posizione pulsante e specifiche programmi.....	4
1.2.1. Individuare la frequenza con l'aiuto dei colori.....	5
1.3. Energizzare e armonizzare bevande	6
1.4. Uso del supporto ampolla	6
1.5. Dati tecnici	7
1.6. Sostituzione delle batterie	7
1.7. Garanzia	7
1.8. Confezione	7
1.9. Manutenzione	7
1.10. Attenzione	7
1.11. Risoluzione dei problemi e test funzionale	8
2. Come lavora il MEDISEND®	8
2.1. Onde di Schumann.....	9
2.2. Onde Geomagnetiche.....	9
2.3. Effetti preventivi sulla salute usando la biorisonanza.....	10
2.4. Campi magnetici protezione da inquinamento elettromagnetico	11

**Si prega di leggere le istruzioni del
MEDISEND® prima di usarlo !**

**Al fine di soddisfare i requisiti di legge, diamo il seguente riferimento:
La terapia del campo magnetico è scientificamente contestata e non riconosciuta dalla
medicina convenzionale.**

Il MEDISEND® non è un dispositivo medico.

**Il MEDISEND® può influenzare positivamente solo la tua
capacità di regolazione. Non viene usato per trattare o curare le malattie.**

Per domande si prega di contattarci!

TELEFONO: +49 (0) 79 34 / 99 34 89-0 FAX: +49 (0) 79 34 / 99 34 89-44

1. Come usare il MEDISEND®

Il **MEDISEND®** è un dispositivo a batteria che emette segnali elettromagnetici. E' piccolo, compatto e emana frequenze elettromagnetiche che sono presenti in natura indisturbata da radiazioni. (guarda **2.0** „come funziona”).


Utilizzando il **MEDISEND®**

- puoi sperimentare un aumento di energia, buona salute e vitalità
- puoi energizzare, rafforzare e promuovere la capacità rigenerazione
- puoi aumentare il vigore fisico e mentale (la concentrazione e attenzione)
- puoi contrastare I disturbi ambientali come l'inquinamento elettromagnetico
- puoi mantenere il tuo benessere
- puoi armonizzare e energizzare il cibo e le bevande.

1.1. Funzionamento di base

Il **MEDISEND®** si accende premendo il tasto “on/off” o il tasto “select”. Dopo che il dispositivo ha effettuato un auto-test dove ogni LED lampeggia per breve tempo – quando sarà pronto il LED del programma lampeggerà. Il dispositivo ha da 1 a 9 programmi corrispondenti a 9 diverse frequenze, selezionabili attraverso il tasto “select”.

Gancio per indossarlo al collo. Portare il **MEDISEND®** all'altezza (tra il plesso solare e la ghiandola del timo)

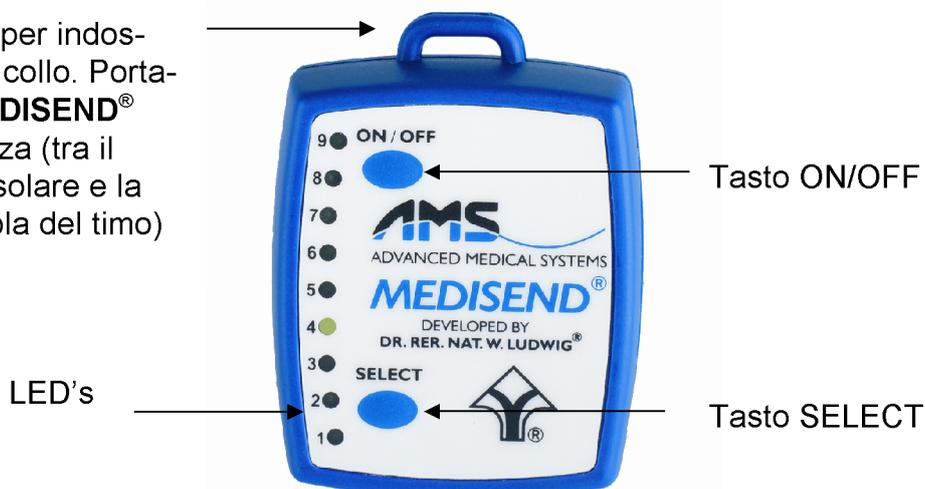

Quando si attiva il dispositivo con il tasto “on/off”, viene sempre ripristinata l'ultima impostazione scelta. Si spegne automaticamente dopo 30 minuti – se si desidera spegnerlo manualmente basta premere il pulsante “on/off”. Un cambiamento di frequenza non causa un reset del timer. A seconda della frequenza scelta, il LED lampeggerà più velocemente o più lentamente.

Per iniziare si deve sapere che il **MEDISEND®** ha un raggio di azione di circa 30 cm e il suo campo magnetico ha un diametro penetrante totale di 60 cm, non importa se posizionato di fronte o al rovescio.

Provare a lasciarsi guidare dalla scala di colore (vedi capitolo 1.2.1) semplicemente scegliendo il colore che più piace e programmare il dispositivo in base alla frequenza corrispondente al colore.

Si consiglia di utilizzare il dispositivo vicino al corpo per un periodo di tempo che varia dai 10 minuti, fino ad 1 ora ogni giorno, al mattino. Se vi è ulteriore necessità (ad esempio, per rilassarsi), è possibile utilizzare il **MEDISEND®** più volte al giorno mettendolo vicino alla ghiandola del timo o in prossimità del plesso solare, oppure vicino al punto del dolore. La sera o di notte, utilizzare solo programmi "1", "2" o "3", essendo queste le frequenze di rilassamento. Prima di andare a dormire, posizionare il **MEDISEND®** sotto il cuscino o in una tasca del pigiama, se impostato, il dispositivo si spegne automaticamente dopo 30 minuti.

Per problemi generali, o di stress, portare il **MEDISEND®** con una collana intorno al collo, in modo che penda sul plesso solare o vicino alla ghiandola del timo (dietro la parte superiore dello sterno). È anche possibile sdraiarsi con il **MEDISEND®** posto dietro la nuca. Il plesso solare è una parte centrale del sistema nervoso simpatico, situata a circa 50 mm sopra l'ombelico.

La ghiandola del timo supervisiona, regola, corregge ed equilibra il flusso di energia del corpo. Secondo J. Diamond, la ghiandola del timo è la connessione tra mente e corpo, perché è il primo organo ad essere influenzato da fattori psichici e da stress (vedi J. DIAMOND, M. D.: „Behavioral Kinesiologie - Your body doesn't lie”).

1.1.1. Programmare lo spegnimento automatico

L'impostazione di fabbrica del dispositivo è spegnimento automatico attiva. Ciò significa che si spegne dopo 30 min. Avete la possibilità di disattivare l'arresto automatico come segue:

1. Spegner il dispositivo.
2. Tenere premuto il pulsante di spegnimento ON-OFF per 5 sec. fino a quando il LED "9" si illumina.
3. Rilasciare il tasto ON-OFF, il LED "9" si spegne. Lo stato del Timer programmato è indicato dal LED luminoso "1" e "2".
 - LED "1" si illumina = Timer attivo / spegnimento automatico dopo 30 min.
 - LED "2" si illumina = Timer disattivato
4. La scelta avviene premendo il tasto SEL
 - LED "1" - Timer attivo
 - LED "2" - Timer disattivato
5. Dopo aver scelto la modalità desiderata, confermarla premendo il tasto ON-OFF

1.2. Posizione pulsante e specifiche programmi

Si possono selezionare i seguenti programmi di funzionamento nel **MEDISEND®**:

Programmi	Frequenze in Hz	Applicazione
1 o 2	3,0 o 4,0	per la notte, i disturbi del sonno, insonnia, tensione nervosa, stress
3	1,2	per il rilassamento, per rinforzare il sistema immunitario, contro le infezioni, in caso di infiammazione, per l'elettrosensibilità, quando si è al computer
4 o 5	7,8 o 8,2	per mancanza di concentrazione, disattenzione; energizzante per bevande e cibo (utilizzare solo il prog. "4")
6 o 7	10,0 o 12,0	per l'utilizzo durante il giorno, per il benessere generale; per combattere la sensibilità alle variazioni climatiche(meteoropatia), lievi emicranie, mal d'auto, disturbi da fuso orario(jet-lag)
8 o 9	20,0 o 33,0	dona più forza e energia; per stanchezza, mancanza di energia, spossatezza

Perché ognuno è diverso e risponde in modo diverso, provare una o l'altra delle due frequenze suggerite per ogni applicazione.

Es.: per mancanza di concentrazione provare la posizione "4" (= 7,8 Hz) e "5" (= 8,2 Hz), così da individuare quale funziona meglio per se stessi. In linea di principio, è evidente che circa il 70% di tutte le persone che usano il **MEDISEND®** reagiscono positivamente ai programmi ("1, 3, 4, 6, 8") indicati nella tabella. Circa il 30% di tutte le persone che usano il **MEDISEND®** reagiscono positivamente ai programmi (2, 5, 7 e 9) indicati nella tabella.

In generale, le frequenze basse aiutano e vengono usate come calmante e rilassante, mentre le frequenze più alte aiutano e vengono usate come stimolante. Secondo la nostra esperienza, il programma "3" è il programma più utilizzato. La maggior parte degli utenti ci riporta, che solo, in un secondo momento, utilizzando il **MEDISEND®** con assiduità e frequenza hanno imparato a "sentire" l'impostazione della frequenza giusta per loro. Lo stesso vale anche per la durata di utilizzo. Provate ad ascoltare il vostro subconscio. Dopo l'uso del **MEDISEND®**, è consigliabile bere almeno un bicchiere d'acqua, con un basso contenuto di minerali per aiutare le tossine ad essere rilasciate e eliminate dal corpo.

1.2.1. Individuare la frequenza con l'aiuto dei colori

A pagina 6 si trova la scala di colori, che è di aiuto nella scelta ottimale tra le nove frequenze del **MEDISEND®**, a seconda di come ci si sente. Si può anche fare riferimento alla tabella "impostazione" e "frequenza in Hz", (vedi sopra). Per aiutarvi a capire ancora di più, è importante sapere che la luce e i colori influenzano il nostro benessere emotivo e giocano un ruolo decisivo per la nostra salute.

Corpo e mente reagiscono alla luce e al colore, perché i colori non sono altro che oscillazioni elettromagnetiche.

La scelta di un colore rispetto ad un altro è legata alla sensazione che ci trasmette.

Questo perché secondo il Prof. Dr. Max Lüscher, famoso psicoterapeuta svizzero, le ragioni di scelta avvengono nel nostro subconscio. I colori che vengono spontaneamente preferiti mostrano ciò che vogliamo mentre i colori che vengono esclusi mostrano quello che non vogliamo.

Sulla base della scelta del colore potete impostare la frequenza corrispondente al programma del MEDISEND®.

La procedura per scegliere il colore e la sua relativa singola frequenza, da impostare sul **MEDISEND®** è la seguente:

1. Osservare rapidamente la scala colore (vedi pagina 6).

2. Ponendosi la domanda:

Quale colore mi piace in questo momento e mi fa del bene?

Importante! Questa domanda si riferisce al colore che si desidera in quel momento e non è la scelta del tuo colore preferito!


3. Scegliere spontaneamente un colore dalla scala colore!

4. Una volta scelto il colore, prendere nota della corrispettiva frequenza, cercarla nella tabella a pag. 4 nella „colonna frequenza in Hz“ e vedere a quale programma è associato da 1 a 9.

5. Utilizzare il pulsante "SELECT", selezionare la visualizzazione appropriata dal LED tra "1" e "9"

6. Posizionare il **MEDISEND®** sulla ghiandola del timo o del plesso solare.

7. Ricordare che il dispositivo ha un raggio di azione di 60 cm di diametro totale.

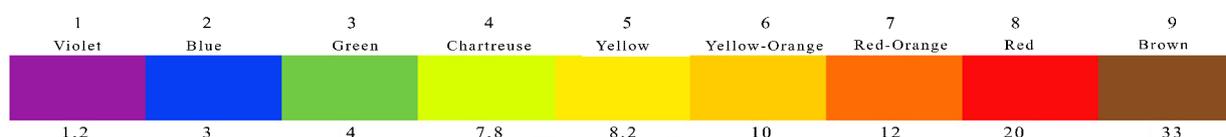

Nota: non è un errore di stampa che il display LED inizia con il numero "3" (= violet = 1.2Hz) e non con 1.

1.3. Energizzare e armonizzare bevande

Per stimolare e armonizzare l'energia delle bevande come l'acqua minerale, selezionare il programma "4" sul **MEDISEND®** per 10 minuti vicino al bicchiere o bottiglia (si prega di tenere a mente il raggio di 30 cm). Per immagazzinare l'energia per un periodo di tempo più lungo, agitare il contenitore fortemente circa 20 volte immediatamente dopo l'applicazione. Se la bevanda deve essere consumata immediatamente (entro 20 minuti) non è necessario agitarla.

1.4. Uso del supporto ampolla

La consegna del **MEDISEND®** comprende anche un secondo dispositivo da applicare sul retro, con una fiala integrata. Agganciare il supporto al dispositivo posteriore è molto semplice. Allentare la vite sul retro del dispositivo con un cacciavite adatto. Si prega di assicurarsi che il cacciavite è abbastanza grande - un cacciavite che è troppo piccolo può danneggiare le piccole viti. Questo è il motivo per cui abbiamo messo due viti in più per il dispositivo. Applicare alla parte posteriore il pannellino con la clip ampolla e stringere la vite. Nella fiala di vetro in dotazione è ora possibile inserire qualsiasi rimedio (ad esempio, un rimedio omeopatico). È sufficiente che la fiala è riempita fino a metà.

ATTENZIONE! Pericolo di lesioni attraverso eventuali schegge di vetro! Inserire la fiala di vetro, piano piano dall'alto e non spingerla incastrandola dal davanti.

Esami spettroscopici dimostrano che il campo magnetico prodotto dal **MEDISEND®** è modulato con le onde del rimedio (vedi frequenze geomagnetiche).

Il campo magnetico pulsante del **MEDISEND®** serve come guida di trasporto per le onde elettromagnetiche, che vengono continuamente emessi dal rimedio dalla fiala di vetro. Questa modulazione risulta indipendente dalla impostazione della frequenza scelta! Ciò significa che con l'uso del pannellino ampolla è anche possibile scegliere le frequenze specifiche dei rimedi, con la quale si è avuta un'esperienza positiva.

Non utilizzare MEDISEND® con il pannellino ampolla durante la guida, lo sport o lavoro pesante, perché un incidente può causare lesioni a causa di eventuali schegge di vetro (vetro fiala).

1.5. Dati tecnici



Potenza segnale:	approx. 0,2 μ T (programma "9")
Dimensioni:	50 mm x 66 mm x 15 mm senza pannellino ampolla 65 mm x 66 mm x 15 mm con pannellino ampolla
Peso:	52 gms senza pannellino ampolla 55 gms con pannellino ampolla
Batterie:	2 batterie tipo AAA 1,5 V/1 AH (qualità standard)
Consumo:	depende dai programmi in uso 15 - 40 μ A (micro ampere)
Approvazione:	Riporta il marchio CE di approvazione per l'uso in paesi CEE

In circostanze normali (4 volte al giorno), le batterie fornite dureranno almeno 2 anni. Se il LED verde non lampeggia quando è acceso, sostituire le batterie.

1.6. Sostituzione delle batterie

Allentare la vite sul retro, rimuovere la parte posteriore e sostituire entrambe le pile rispettando i poli (+/-). Fissare la parte posteriore e stringere la vite.

1.7. Garanzia

A decorrere dalla data di acquisto concediamo una garanzia di 2 anni per il dispositivo, perseguendo un uso corretto.

1.8. Confezione

MEDISEND[®] incl. batterie, con pannellino ampolla, due viti in più, una fiala di vetro, manuale.

1.9. Manutenzione

MEDISEND[®] esente da manutenzione. Per pulirlo utilizzare un panno umido.

1.10. Attenzione

- Non utilizzare il **MEDISEND®** con la clip ampolla durante la guida, sport o lavoro pesante, perché un incidente può causare lesioni a causa di eventuali schegge di vetro (vetro fiala).
- Non mettere il dispositivo acceso nei pressi di carte di credito ecc, perché i dati memorizzati potrebbero essere eliminati.
- Non esporre il **MEDISEND®** a liquidi, fiamme libere o al calore.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali leggermente infiammabili.
- Non accendere il dispositivo al decollo e l'atterraggio durante un viaggio in aereo.
- Non accendere il dispositivo durante il check-in all'aeroporto, passando per la sicurezza ecc.
- Se il dispositivo non deve essere utilizzato per un periodo di tre mesi o più, rimuovere le batterie durante il periodo di non uso.

1.11. Risoluzione dei problemi e test funzionale

Perché il display a LED non lampeggia quando il dispositivo è acceso?

Causa possibile:

batterie scariche

Provvedimenti da prendere:

Sostituire le batterie.

Le batterie sono state sostituite, ma il dispositivo non funziona.

Causa possibile:

Le batterie sono posizionate male.

Provvedimenti da prendere:

Aperto il pannellino sul retro con un cacciavite, troverete le pile:

fare attenzione al verso e rispettare il verso dei poli (+ e -)

È possibile ascoltare i segnali di campo magnetico una volta attivato il dispositivo. Avvicinandolo ad una radio a transistor impostata sulla banda ad onde medie è possibile ascoltare i rumori in modo pulsato causati dal campo elettromagnetico del **MEDISEND®**. Se non si sente il rumore, in primo luogo cercare di modificare l'impostazione della radio. Le armoniche del campo elettromagnetico non sono udibili ad ogni frequenza ad onde medie. Se però non si sente alcun rumore pulsante selezionando tutti i programmi del **MEDISEND®**, si prega di contattare via e-mail o per telefono la casa madre risponderanno al più presto possibile.

2. Come lavora il MEDISEND®


Il **MEDISEND®** è un dispositivo che emette campi elettromagnetici, sviluppato dal fisico internazionale, **Dr. rer. nat. Wolfgang Ludwig®**. Esso emette un segnale biologicamente attivo elettromagnetico che corrisponde e imita l'ambiente elettromagnetico naturale della terra.

Tre tipi di biosegnali energicamente attivi sono presenti nell'ambiente terrestre naturale: **le onde di Schumann, onde geomagnetiche e le onde solari.**

2.1. Onde di Schumann

A circa 100 chilometri sopra la superficie, la terra è circondata dalla ionosfera. Il vasto spazio tra la ionosfera e la superficie della terra agisce come un enorme cavità di risonanza elettromagnetica, come la cassa di uno strumento musicale. Queste onde elettromagnetiche risonanti sono conosciute come le onde di Schumann, dal nome del loro scopritore, il fisico W.O. Schumann (vedi fig. 1).

Fig. 1: **Schumann waves**

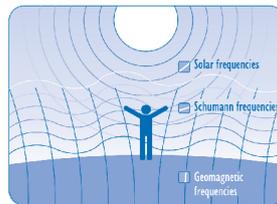


La forma d'onda di base (prima armonica) ha una frequenza di 7,8 Hz. Esattamente la stessa frequenza è presente nel centro di controllo principale del cervello umano, l'ippocampo / ipotalamo; cioè la regione del cervello, importante per l'attenzione e concentrazione ma non solo.

2.2. Onde Geomagnetiche

La crosta terrestre contiene 64 elementi che sono di vitale importanza, come i cosiddetti oligoelementi. Ciascuno di questi oligoelementi possiede delle sue proprie caratteristiche vibrazionali. Il campo magnetico terrestre è influenzato e modulato da queste vibrazioni, la modulazione risultante viene conosciuta come onde geomagnetiche (vedi fig. 2). La crosta terrestre contiene lo stesso materiale minerale essenzialmente vitale ("oligoelementi"), come quelli esistenti nei globuli rossi, nel sangue degli esseri umani. La relazione tra l'un e l'altro è quasi la stessa.

Fig. 2: **Geomagnetic waves**

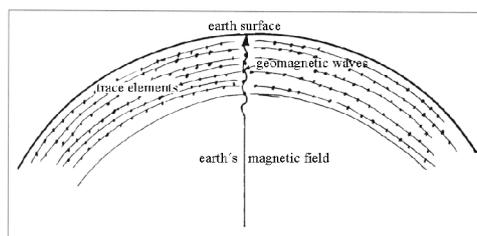

Il Dr. Ludwig® ha scoperto che uno squilibrio delle onde di Schumann e onde geomagnetiche induce uno squilibrio nelle creature viventi. I primi generatori di onde di Schumann sono stati sviluppati dal Dr. Ludwig® e colleghi nel 1974 e da allora sono stati in un continuo stato di sviluppo. Grazie al lavoro del **Dr. Ludwig®** gli equipaggiamenti della NASA per primi hanno potuto adottare gli speciali simulatori del "campo naturale" per garantire gli indispensabili stimoli biotopi anche nello spazio. Senza l'impiego di questi simulatori si presenterebbero dei disturbi (come succedeva in effetti durante i primi viaggi nello spazio).

La medicina tradizionale cinese, ha sempre detto che l'uomo ha bisogno di segnali ambientali di due tipi: di ingresso yang dall'alto (onde di Schumann) e ingresso yin dal basso (le onde geomagnetiche). Entrambi segnali devono essere in equilibrio.



Importante! I dispositivi sviluppati dal **Dr. W. Ludwig®** sono marcati con il simbolo della freccia. Questo simbolo raffigura un campo elettro-biomagnetico che rappresenta la natura indisturbata da radiazioni. Con un processo unico al mondo genera uno spettro di frequenza riproducendo fedelmente i 64 oligoelementi essenziali (frequenze geomagnetiche).

2.3. Effetti preventivi sulla salute usando la biorisonanza

In medicina, in particolare in medicina naturale, uno stato morboso è chiamato "disarmonica" e uno stato di salute è chiamato "armonica". Se il corpo riceve i segnali armonici corretti, l'organismo risponde loro e viene avviato un processo di guarigione.

I dispositivi di campo magnetico sviluppato dal **Dr. W. Ludwig®** producono onde armoniche che sono bio energeticamente vitali. Le vibrazioni degli esseri umani sono in risonanza con le vibrazioni dell'ambiente naturale. Le creature viventi utilizzano le caratteristiche di queste onde armoniche per controllare i loro processi interni del loro metabolismo, dell'equilibrio ormonale, del funzionamento del sistema nervoso autonomo e così via.

Le onde armoniche promuovono l'autoguarigione!

Al centro dei dispositivi di campo biomagnetico, sviluppati dal **Dr. W. Ludwig®** c'è un nucleo, un'antenna molto particolare, che è in grado di riprodurre, le frequenze dei 64 oligoelementi, questo per aiutare con precisione la riproduzione fedele dei campi magnetici ed elettromagnetici della terra. Stabilizzando, il bilanciamento e energizzando il corpo e la mente. Tali generatori sono stati costruiti per portare benefici concreti a chi soffre di diversi disturbi, tra cui: reumatismi, artrite, disturbi circolatori, emicrania, dolore, stanchezza, disturbi del sonno, sensibilità del tempo, infiammazione e altri problemi causati da affaticamento e stress.

2.4. Campi magnetici protezione da inquinamento elettromagnetico

Il secolo scorso è stato testimone di una vasta interferenza di frequenze artificiali sull'uomo a discapito di un ambiente naturale. Molti tipi di attività hanno alterato l'ambiente elettromagnetico e geomagnetico naturale. Per esempio, l'abbassamento della falda, l'effetto isolante dell'asfalto e l'effetto schermante di edifici di metallo costruiti in cemento armato, hanno contribuito, all'indebolimento e alla distorsione sia delle **frequenze di Schumann** che delle **onde geomagnetiche**. Queste frequenze naturali si sovrappongono, ma ad oggi in maniera distorta o addirittura disturbate da frequenze prodotte artificialmente derivanti dai radar, radio, stazioni televisive, segnali di telefonia mobile, così come da quasi tutti i dispositivi di lavoro e per la casa elettrici ed elettronici. E' probabile che molti dei problemi di salute riscontrati nei tempi moderni sono direttamente causati **dall'inquinamento elettromagnetico**.

Tuttavia, mediante l'uso della microelettronica, è ora possibile riprodurre questi segnali armonici, nonché le caratteristiche elettromagnetiche dei processi cellulari, e utilizzare questa tecnica per il miglioramento della salute.

L'efficacia del dispositivo di campo magnetico sviluppato dal **Dr. Ludwig®** è stato testato in un gran numero di studi scientifici e clinici, compresi i test in doppio cieco e singoli casi di studio. I risultati parlano da soli.

**ADVANCED
MEDICAL
SYSTEMS**

**AMS GMBH
HAUPTSTR. 26
97990 WEIKERSHEIM
GERMANY**

**Tel: +49 (0) 79 34 / 99 34 89-0
FAX: +49 (0) 79 34 / 99 34 89-44
E-MAIL: info@ams-ag.de
www.magnetotherapy.de**
